



NanoKnife

TÁVTARTÓ EGYELEKTRÓDÁS SZONDÁKHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS



16910474-06B – Hungarian
2023. 03.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM

ONLY

Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz csak orvos által értékesíthető vagy orvos utasítására használható.

Ezt az eszközt etilén-oxidál sterilizálták. Ez az eszköz kizárólag egyetlen betegnél használható. Bontatlan és ép csomagolás esetén steril. Tilos újraszterilizálni.

A távtartó kizárólag az AngioDynamics egyelektródás szondáival használható. A NanoKnife eljárással kapcsolatos további információkért olvassa el a szonda használati utasítását.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása a beteg vagy a felhasználó fertőződésének potenciális kockázatával jár. Az eszköz szennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

Az újrafeldolgozás ronthatja az eszköz integritását és/vagy az eszköz élegtenségéhez vezethet.

A TERMÉK LEÍRÁSA


A távtartó egyetlen alkotóelemből áll, amely egy elsődleges szondahellyel és 4 másodlagos szondahellyel rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy felhasználó a szondákat egymástól 10–25 mm +/- 1 mm távolságban helyezze el.

AZ ESZKÖZ RENDELTETÉSE


Az egyelektródás szondák távtartója az egyelektródás szondák párhuzamos és egymástól meghatározott távolságban történő elhelyezését hivatott biztosítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Használat előtt ellenőrizze az eszközöket és a csomagolást, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Ha valamelyik eszköz vagy a steril védőcsomagolás megsérült, NE használja az eszközt.
- Steril technikát használva bontsa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki az eszközt.
- Csatlakoztassa a távtartót az első szondához, úgy hogy végigcsúsztatja benne a szondát (az 1. ábrán látható módon) vagy úgy, hogy rápatintja a távtartót a szonda szárára (a 2. ábrán látható módon).
- Csatlakoztassa a távtartót a második szondához, úgy hogy végigcsúsztatja benne a szondát (az 1. ábrán látható módon) vagy úgy, hogy rápatintja a távtartót a szonda szárára (a 2. ábrán látható módon).

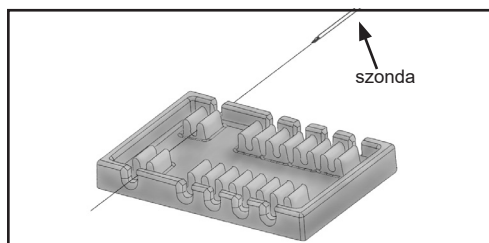

1. ábra

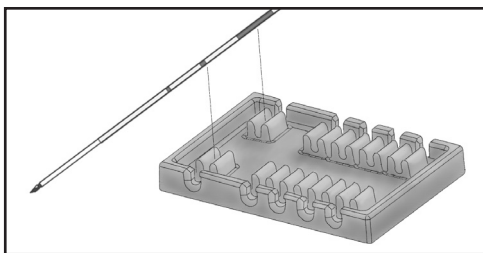

2. ábra

A 21 CFR 801.15 rész előírásaival összhangban a NanoKnife távtartó címkéjén kísérőszöveg nélkül megjelenő szimbólumok magyarázata a NanoKnife rendszer felhasználói kézikönyvében található.

SZIMBÓLUM	CIKKSZÁM	SZIMBÓLUM MEGNEVEZÉSE	SZIMBÓLUM JELENTÉSE
UPN	–	Univerzális termékszám	Az univerzális termékszám (UPN) kód egy eszköz gyártói kódszámát jelenti.
	–	Mennyiség a csomagban	Azt jelzi, hogy a mellette lévő számnak megfelelő számú egység található a csomagban.
	–	Újrahasznosítható csomagolás	Újrahasznosítható csomagolás. ^a

a. EN ISO 14021 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés)

* Az AngioDynamics, az AngioDynamics logó, a NanoKnife és a NanoKnife logó az AngioDynamics, Inc., illetve társult vállalatának vagy leányvállalatának védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

UK **UK Responsible Person:**
CA AngioDynamics UK Ltd.
0086 c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

€ 2797

© 2023 AngioDynamics, Inc. vagy társult vállalatai.
Minden jog fenntartva.