



# NanoKnife

DISTANČNÍ DESTIČKA PRO  
JEDNOELEKTRODOVÉ SONDY  
NÁVOD K POUŽITÍ



16910474-07B – čeština  
2023-03

## NÁVOD K POUŽITÍ

### UPOZORNĚNÍ

**Rx ONLY** Dle federálních zákonů USA smí toto zařízení být prodáváno nebo používáno jen na objednávku lékaře.

Toto zařízení se sterilizuje ethylenoxidem. Zařízení je sterilní a je určeno k použití na jednom pacientovi. Sterilní je za předpokladu, že obal není otevřený nebo poškozený. Neprovádějte resterilizaci.

Distanční destička je určena pro použití pouze s jednoelektrodovými sondami AngioDynamics. Další informace týkající se procedury NanoKnife viz Návod k použití sondy.

### VAROVÁNÍ

Opakované použití zařízení pro jedno použití představuje možné riziko infekce pro pacienta nebo uživatele. Kontaminace prostředku může vést k poranění, onemocnění či úmrtí pacienta.

Zpracování k dalšímu použití může narušit integritu zařízení anebo vést k jeho poruše.

### POPIS PRODUKTU


Distanční destička je jednoduchá komponenta s jedním primárním místem pro sondu a 4 sekundárními místy pro sondy v krocích od 10 mm do 25 mm, +/- 1 mm.

### ÚČEL POUŽITÍ


Distanční destička pro jednoelektrodové sondy je určena k držení jednoelektrodových sond rovnoběžně a ve stanovené vzdálenosti od sebe.

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím zkontrolujte, zda všechny přístroje a obal nejsou poškozené. NEPOUŽÍVEJTE přístroje, jsou-li poškozené nebo mají porušenou sterilní bariéru.
2. Použitím sterilní techniky otevřete balení a opatrně vyjměte přístroj.
3. Připevněte distanční destičku k první sondě buď protáhnutím sondy destičkou (viz obrázek 1), nebo navaknutím na tyčku sondy (viz obrázek 2).
4. Připevněte druhou sondu k distanční destičce buď protáhnutím sondy destičkou (viz obrázek 1), nebo navaknutím na tyčku sondy (viz obrázek 2).

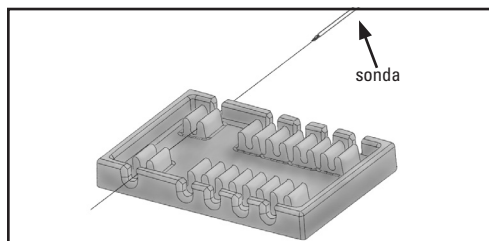

Obrázek 1

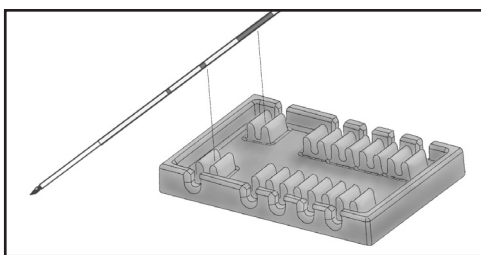

Obrázek 2

V souladu s nařízením 21 CFR část 801.15 je glosář symbolů, které se v označení distanční destičky NanoKnife objevují bez průvodního textu, poskytnut v uživatelské příručce systému NanoKnife.

SYMBOL	REF. Č.	NÁZEV SYMBOLU	VÝZNAM SYMBOLU
	NA	Univerzální produktové číslo	A Kód univerzálního produktového čísla (UPN) představuje číslo výrobce položky.
	NA	Množství v balení	Označení toho, že sousední číslo znamená počet jednotek v balení.
	NA	Recyklovatelný obal	Recyklovatelný obal.*

a. EN ISO 14021 Ekologické značky a prohlášení. Vlastní deklarovaná ekologická tvrzení (ekologické značení typu II)

\* AngioDynamics, logo AngioDynamics, NanoKnife a logo NanoKnife jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti AngioDynamics, Inc., její pobočky nebo dočasně společnosti.

AngioDynamics, Inc.  
603 Queensbury Avenue  
Queensbury, NY 12804 USA  
USA Customer Service  
800-772-6446



AngioDynamics  
Netherlands BV  
Haaksbergweg 75  
1101 BR, Amsterdam  
The Netherlands

**UK** UK Responsible Person:  
AngioDynamics UK Ltd.  
c/o Kidd Rapinet  
29 Harbour  
Exchange Square  
London E14 9GE  
United Kingdom

**CE 2797**

© 2023 AngioDynamics, Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.