



NanoKnife

ODSTOJNIK ZA SONDU SA JEDNOM
ELEKTRODOM UPUTSTVO ZA UPOTREBU



16910474-19B - Serbian
2023-03

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPREZ

ONLY Savezni zakon (SAD) ograničava ovaj uređaj na prodaju i korišćenje od strane ili po nalogu lekara.

Ovaj uređaj je sterilisan etilen oksidom. Ovaj uređaj je sterilan i namenjen upotrebi na samo jednom pacijentu. Sterilno samo ako nije otvoreno ili oštećeno. Nemojte ponovo da sterilizujete.

Odstojnik je namenjen korišćenju samo sa AngioDynamics sondama sa jednom elektrodom. Pogledajte Uputstva za upotrebu sonde za dodatne informacije u vezi sa NanoKnife postupkom.

UPOZORENJA

Ponovna upotreba medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu stvara rizik od infekcija kod pacijenta ili korisnika. Kontaminacija uređaja može dovesti do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.

Prerađivanje može da ugrozi integritet uređaja i/ili da dovede do kvara uređaja.

OPIS UREĐAJA


Odstojnik čini jedna komponenta sa jednom primarnom lokacijom sonde i 4 sekundarne lokacije sonde koje omogućuju korisniku da postavi sonde u razmacima od 10–25 mm, +/- 1 mm.

NAMENA


Odstojnik sonde se jednom elektrodom namenjen je držanju sonde sa jednom elektrodom paralelno i na određenom rastojanju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pre upotrebe pregledajte sve uređaje i pakovanje radi oštećenja. NE koristite nijedan uređaj koji je oštećen ili ako je sterilna zaštita probijena.
2. Koristeći sterilnu tehniku, otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
3. Povežite odstojnik sa prvom sondom tako što ćete ili provući sondu kroz njega (kao što je prikazano na Slici 1) ili ga zakačiti na osovinu sonde (kao što je prikazano na Slici 2).
4. Povežite odstojnik sa drugom sondom tako što ćete ili provući sondu kroz njega (kao što je prikazano na Slici 1) ili ga zakačiti na osovinu sonde (kao što je prikazano na Slici 2).

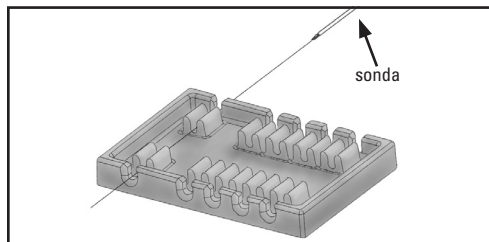

Slika 1

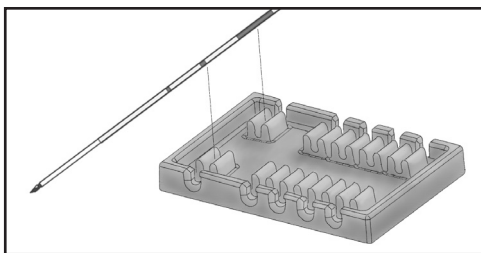

Slika 2

U skladu sa odredbama zakona 21 CFR deo 801.15, u Uputstvu za upotrebu sistema NanoKnife se nalazi rečnik simbola koji se javljaju bez pratećeg teksta na nalepnicama Odstojnika NanoKnife sonde.

SIMBOL	REF BR	NASLOV SIMBOLA	ZNAČENJE SIMBOLA
	Nije primenljivo	Univerzalni broj proizvoda (UPN)	Šifra sa univerzalnim brojem proizvoda (UPN) predstavlja proizvođačev broj određenog artikla.
	Nije primenljivo	Količina u pakovanju	Označava da broj pored predstavlja broj jedinica koje se nalaze u pakovanju.
	Nije primenljivo	Pakovanje koje može da se reciklira	Pakovanje se može reciklirati. ^a

a. EN ISO 14021 Oznake i izjave vezane za zaštitu životne sredine. Samoproglašene ekološke tvrdnje (Eko oznaka tipa II).

* AngioDynamics, logotip AngioDynamics, NanoKnife i Nanoknife logotip su zaštitni znaci i/ili registrovani zaštitni znaci kompanije AngioDynamics, Inc., filijale ili podružnice.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

UK
CA
0086

UK Responsible Person:
AngioDynamics UK Ltd.
c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

CE 2797

© 2023 AngioDynamics, Inc. ili filijale ove kompanije.
Sva prava zadržana.