



NanoKnife

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ОДНОЭЛЕКТРОДНЫХ
ЗОНДОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

RU ONLY Федеральное законодательство США разрешает продажу или применение этого изделия только врачам или по назначению врача.

Данное изделие стерилизовано с использованием этиленоксида. Данное изделие поставляется стерильным и предназначается для однократного использования на одном пациенте. Стерильность сохраняется до вскрытия или повреждения упаковки. Запрещается стерилизовать повторно.

Разделитель предназначен для использования только совместно с одноэлектродными зондами AngioDynamics. Дополнительную информацию о порядке проведения процедур с использованием системы NanoKnife см. в инструкции по применению зонда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Повторное использование одноразовых изделий создает потенциальный риск инфицирования пациента или пользователя. Загрязнение изделия может стать причиной травмы, болезни или смерти пациента.

Повторная обработка может нарушить целостность изделия и (или) привести к его поломке.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Разделитель является слитной деталью с одним основным местоположением зонда и четырьмя вспомогательными местоположениями, что позволяет пользователю размещать зонды с промежутками от 10 до 25 мм +/- 1 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Разделитель одноэлектродных зондов предназначен для параллельного удерживания одноэлектродных зондов на определенном расстоянии друг от друга.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед использованием осмотрите все изделия и упаковки на предмет наличия повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать любые изделия, которые повреждены или имеют нарушенную стерильную защиту.
2. Соблюдая правила асептики, вскройте упаковку и осторожно извлеките изделие.
3. Прикрепите к разделителю первый зонд, задвинув зонд сбоку (как показано на рисунке 1) или с щелчком вставив стержень зонда сверху (как показано на рисунке 2).
4. Прикрепите к разделителю второй зонд, задвинув зонд сбоку (как показано на рисунке 1) или с щелчком вставив стержень зонда сверху (как показано на рисунке 2).

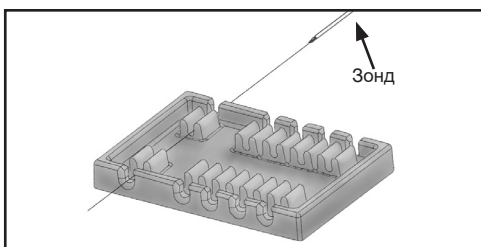


Рисунок 1

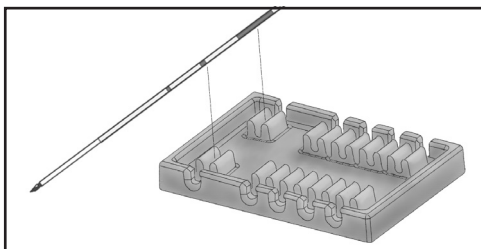


Рисунок 2

В соответствии с требованиями 21 CFR, часть 801.15 глоссарий символов, которые приведены без сопроводительного текста на маркировке разделителя зондов NanoKnife, представлен в руководстве пользователя системы NanoKnife.

СИМВОЛ	СПРАВ. №	НАЗВАНИЕ СИМВОЛА	ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА
UPN	НП	Универсальный номер изделия	Код универсального номера изделия (УНИ) представляет номер изготовителя для изделия.
	НП	Количество в упаковке	Указывает, что рядом расположенный номер отражает количество единиц, содержащихся в упаковке.
	НП	Упаковка подлежит вторичной переработке	Упаковка подлежит вторичной переработке.*

а. EN ISO 14021 «Экологические этикетки и декларации. Заявленные претензии со стороны природоохранных органов (экологические этикетки типа II)».

* AngioDynamics, логотип AngioDynamics, NanoKnife и логотип NanoKnife являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками корпорации AngioDynamics, Inc., ее филиалов или дочерних компаний.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

UK UK Responsible Person:
AngioDynamics UK Ltd.
c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

CE 2797

© AngioDynamics, Inc. или ее филиалы, 2023. Все права защищены.