



NanoKnife

РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА ЕДИНИЧНА
ЕЛЕКТРОДНА СОНДА
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



27 °C

16910474-31B – Български
2023-03

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ

ONLY Федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата на това изделие да се извършва само от страна на лекар или да се употребява по предписание на такъв.

Това устройство е стерилизирано с етилен оксид. Устройството е стерилно и предназначено за използване от един пациент. Стерилно, освен ако опаковката е отворена или повредена. Да не се стерилизира повторно.

Разделителят е предназначен за използване само с единични електродни сонди AngioDynamics. Вижте инструкциите за употреба на сондата за допълнителна информация относно процедурата NanoKnife.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Повторното използване на изделия за еднократна употреба създава потенциален риск от инфекция на пациента или персонала, използващ изделието. Замърсяването на изделието може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента.

Повторното обработване може да наруши цялостта на изделието и/или да доведе до неизправност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


Разделителят е единичен компонент с една локация за основна сонда и 4 локации за вторични сонди, което позволява на потребителя да позиционира сондите на стъпки от 10 mm до 25 mm, +/- 1mm.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Разделителят за единична електродна сонда е предназначен да задържа единичните електродни сонди паралелни и на зададеното разстояние едни от други.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Преди употреба проверете всички изделия и техните опаковки за щети. НЕ използвайте изделия, по които има щети или чиято стерилна обвивка е била повредена.
2. Използвайте стерилна техника, за да отворите опаковката, и внимателно извадете изделието.
3. Прикачете разделителя към първата сонда, като плъзнете сондата през него (както е показано на Фигура 1) или го щракнете към вала на сондата (както е показано на Фигура 2).
4. Прикачете втората сонда към разделителя, като плъзнете сондата през него (както е показано на Фигура 1) или го щракнете към вала на сондата (както е показано на Фигура 2).

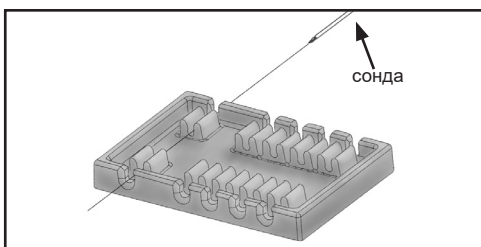

Фигура 1

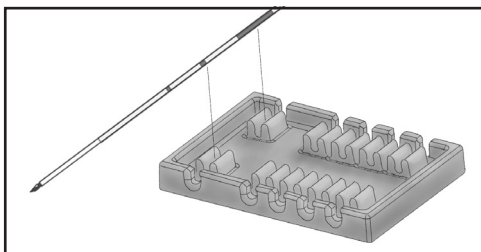

Фигура 2

В съответствие с изискванията на 21 CFR Част 801.15, в ръководството на потребителя на система NanoKnife е предоставен речник на символите, които са включени без придружителен текст в етикетите на разделителя за сонди NanoKnife.

СИМВОЛ	РЕФ. №	ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА	ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛА
UPN	Няма данни	Универсален номер на продукт	Кодът за универсален номер на продукт (UPN) представлява номера на производителя за даден артикул
	Няма данни	Количество в опаковката	Посочва, че числото отразява броя единици в опаковката.
	Няма данни	Рециклируема опаковка	Рециклируема опаковка.*

a. EN ISO 14021 Етикети и декларации за околната среда. Самодекларирани екологични претенции (Тип II екологично етикетиране)

* AngioDynamics, логото на AngioDynamics, NanoKnife и логото на NanoKnife са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на AngioDynamics, Inc., филиал или подразделение.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

UK UK Responsible Person:
AngioDynamics UK Ltd.
c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

€ 2797

© 2023 г. AngioDynamics, Inc. или нейните филиали.
Всички права запазени.