



NanoKnife

DIŠŤANČNÁ VLOŽKA PRE SONDU
S JEDNOU ELEKTRODOU
NÁVOD NA POUŽITIE

SK



16930474-16A – Slovenčina
2026-01

NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE

ONLY Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky lekárom alebo použitie na základe predpisu lekára.

Táto pomôcka je sterilizovaná etylénoxidom. Pomôcka je sterilná a určená na použitie u jedného pacienta. Obsah balenia je sterilný, ak nie je otvorené alebo poškodené. Nesterilizujte opakovane.

Dištančná vložka je určená iba na použitie so sondou s jednou elektrodou AngioDynamics. Ďalšie informácie o postupe NanoKnife nájdete v návode na použitie sondy.

VAROVANIA

Opätovné použitie jednorazovej pomôcky vytvára potenciálne riziko infekcií pacienta alebo používateľa. Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, chorobe alebo usmrteniu pacienta.

Opakované spracovanie môže narušiť celistvosť pomôcky a/alebo viesť k jej poruche.

OPIS VÝROBKU


Dištančná vložka je jeden komponent s jediným primárnym umiestnením a 4 sekundárnymi umiestneniami sondy, ktoré umožňujú používateľovi umiestniť sondy v prírastkoch od 10 mm do 25 mm, +/- 1 mm.

URČENÉ POUŽITIE


Dištančná vložka pre sondu s jednou elektrodou je určená na paralelné držanie sond s jednou elektrodou a v stanovenej vzdialenosti od seba.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím skontrolujte všetky pomôcky a balenie, či nie sú poškodené. Nepoužívajte pomôcky, ktoré sú poškodené alebo ak je porušená ich sterilná bariéra.
2. Sterilnou metódou otvorte balenie a pomôcku opatrne vyberte.
3. K prvej sonde pripevníte dištančnú vložku tak, že sondu zasuniete (ako je znázornené na obrázku 1) alebo ju nacvaknete na driek sondy (ako je znázornené na obrázku 2).
4. K dištančnej vložke pripevníte druhú sondu tak, že sondu zasuniete (ako je znázornené na obrázku 1) alebo ju nacvaknete na driek sondy (ako je znázornené na obrázku 2).

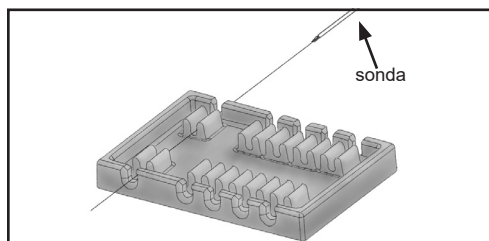

Obrázok 1

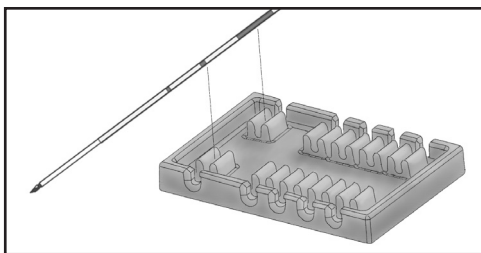

Obrázok 2

V súlade s požiadavkami normy 21 CFR, časť 801.15, sa slovník symbolov, ktoré sa vyskytujú bez sprievodného textu na etikete dištančnej vložky pre sondu NanoKnife, uvádza v používateľskej príručke systému NanoKnife.

SYMBOL	REF. Č.	NÁZOV SYMBOLU	VÝZNAM SYMBOLU
UPN	Nevzťahuje sa	Univerzálne číslo výrobku	Kód univerzálneho čísla výrobku (Universal Product Number, UPN) predstavuje číslo výrobcu pre danú položku.
	Nevzťahuje sa	Množstvo v balení	Na označenie, že vedľa uvedené číslo vyjadruje počet jednotiek obsiahnutých v balení.
	Nevzťahuje sa	Recyklovateľný obal	Recyklovateľný obal.*

a) EN ISO 14021 Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (environmentálne označovanie typu II)

* AngioDynamics, logo AngioDynamics, NanoKnife a logo NanoKnife sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti AngioDynamics, Inc., resp. jej pridruženej alebo dcérskej spoločnosti.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics Netherlands BV
Siriusdreef 17-27
Hoofddorp, 2132 WT
The Netherlands

UK
CA
0086
UK Responsible Person:
AngioDynamics UK Ltd.
c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

€ 2797

© 2026 AngioDynamics, Inc. alebo jej pridružené spoločnosti.
Všetky práva vyhradené.