

AlphaVac QRG
(potpuno rasklopite i pregledajte obje strane)

Postavljanje/priprema

Umetnuti

Umetnite obturator u uvednicu

- Umetnite obturator u uvednicu do kraja.

BLOKADA

Poluga blokadnog ventila

- BLOKIRAJTE polugu ventila.

Ispiranje

Ispirajte lumen navodeće žice i blokadni ventil

- Ispirajte lumen navodeće žice.
- Ispirajte i zatvorite blokadni ventil na uvednici.

Provjerite prije predaje →

Sklop uvednice i obturatora spreman je za postavljanje u pacijenta kad:

- PROVJERITE**
- Obturator je umetnut u uvednicu.
 - Poluga ventila je blokirana.
 - Lumen navodeće žice i blokadni ventil su isprani.
 - Blokadni ventil je zatvoren.
- Spremo je za liječnikovo postavljanje u pacijenta**



Liječnik/praktičar

tromboembolija

uvednica

Uvedite i pozicionirajte uvednicu u pacijentu

- Uvedite uvednicu/obturator.
- Postavite vrh uvednice u područje bez tromboembolije, radi ekstrakcije (ovaj položaj omogućuje širenje lijevka prije aspiriranja).

ODBLOKIRAJTE

Odblokiranje polugu ventila

- ODBLOKIRAJTE polugu ventila.

Uklonite

Uklonite obturator i navodeću žicu

- Dok držite uvednicu u položaju, uklonite obturator i navodeću žicu. Uvednica mora ostati u pacijentu.

Hemostatski ventil održat će zaustavljanje krvi.

Uvednica je spremna za primanje kanile i ručke kad:

- PROVJERITE**
- Uvednica je pozicionirana podalje od tromboembolije.
 - Obturator i navodeća žica su uklonjeni iz uvednice.
- Uvednica je spremna za primanje kanile i ručke**



Postavljanje/priprema

Zakretanjem zatvorite dodatnu Touhy priključnicu

Podignite i uklonite žutu razmaknicu

Zatvorite Touhy i uklonite žutu razmaknicu

- Zatvorite dodatnu Touhy priključnicu.
- Podignite i uklonite žutu razmaknicu.

Priključite

Priključite

Priključite

Priključite kanilu, cijevi i vrećicu za otpad

- Priključite kanilu na ručku.
- Priključite cijevi za otpad na ručku.
- Priključite vrećicu za otpad na cijevi.

Sklop ručke AlphaVac spreman je za liječnika


Provjerite prije predaje →

Sklop ručke AlphaVac spreman je za liječnika kad:

- PROVJERITE**
- Priključnica Touhy za dodatni pribor je zatvorena.
 - Uklonjena je žuta razmaknica.
 - Na ručku su priključene kanila, cijevi vrećice za otpad i vrećica za otpad.
- Sklop ručke spreman je za liječnika**




Potpuno rasklopite i pregledajte obje strane

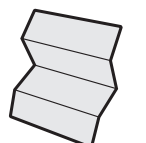

PRIPREMA 4
UMETNITE KANILE I PRIPREMITE SUSTAV

Liječnik/praktičar

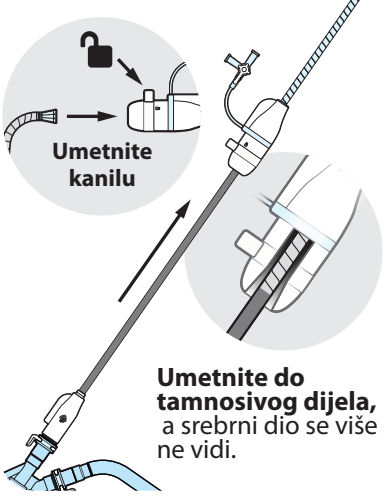

Umetnite kanilu u uvodnicu

- Provjerite ili odblokirajte polugu ventila.
- Držite uvodnicu u području bez tromboembolije za ekstrakciju.
- Umetnite kanilu u uvodnicu do tamnosivog dijela, a srebrni dio se više ne vidi.

Umetnite do tamnosivog dijela, a srebrni dio se više ne vidi.

Umetnite kanilu

NE izvlačite lijevak iz uvodnice dok se priprema ne dovrši.

OPREZ: Pružanje lijevka izvan uvodnice prije pripreme može uvesti zrak i ugroziti pacijenta. Držite lijevak unutar uvodnice, dok se priprema ne dovrši.

BLOKADA

Poluga blokadnog ventila

- BLOKIRAJTE polugu ventila.

Aspirirajte i isperite.

Aspirirajte i isperite blokadni ventil uvodnice

- Aspirirajte zrak iz blokadnog ventila, a zatim isperite i zatvorite blokadni ventil.

Otvorite/zatvorite Touhy priključnicu radi odzračivanja

- Otvorite dodatnu Touhy priključnicu.
- Omogućite odzračivanje kroz priključnicu.
- Zatvorite priključnicu.

Otvaranjem priključnice Touhy za dodatni pribor omogućite odzračivanje.


Zatvorite priključnicu kad se odzračivanje dovrši

- Sustav AlphaVac je pripremljen i spreman za rad kad:
- PROVJERITE**
- Kanila je umetnuta u uvodnicu do tamnosivog dijela.
 - Poluga ventila je blokirana.
 - Ventil je aspiriran, ispran i zatvoren.
 - Odzračivanje se obavilo kroz dodatnu Touhy priključnicu.
 - Priključnica Touhy za dodatni pribor je zatvorena.
- Sustav AlphaVac spreman je za rad**



RAD 5
UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJE

Liječnik/praktičar

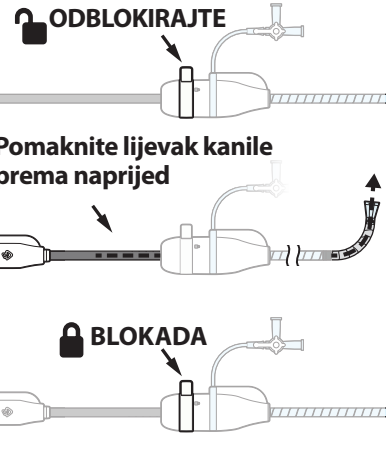

Pomaknite lijevak kanile prema naprijed

BLOKADA

Pomaknite lijevak naprijed

- ODBLOKIRAJTE polugu ventila.
- Pomaknite lijevak kanile prema naprijed.
- BLOKIRAJTE polugu ventila.

Pronađite i uhvatite tromboemboliju

- Pronađite tromboemboliju.
- Povucite okidač ručke prema potrebi, kontroliranim pokretom, čime postupno hvatate tromboemboliju.

Kad uhvatite tromboemboliju

- Nastavite ručno pumpati uporabom postavke pri 10 cc (ml) ili 30 cc (ml).
- Ili uporabite vakuumsku blokadu (pogledajte sljedeću sliku).

Uporaba blokade vakuumom (uporabite samo kad se kanila začepe)

- Tromboembolija mora biti uhvaćena.
- Upotrijebite postavku od 30 cc (ml) i uključite blokadu vakuumom.
- Nastavite pratiti postupak.


1 Povucite okidač unatrag

2 Uključite blokadu vakuumom

OPREZ: Otvaranje priključnice Touhy za dodatni pribor tijekom vakuuma može uvesti zrak u sustav i ugroziti pacijenta. Oprezom pri otvaranju priključnice Touhy za dodatni pribor izbjegnite uvođenje zraka u sustav.

RAD 6
UKLANJANJE SUSTAVA IZ PACIJENTA

Liječnik/praktičar

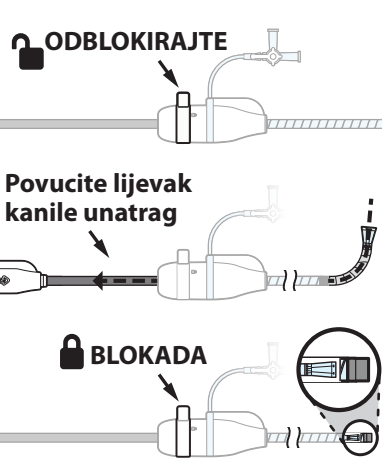

Povucite lijevak kanile unatrag

BLOKADA

Povucite lijevak unatrag

- ODBLOKIRAJTE polugu ventila.
- Povlačenjem kanile unatrag, uvucite lijevak u uvodnicu do kraja.
- BLOKIRAJTE polugu ventila.

Uklonite sustav

- Pri uklanjanja sustava iz pacijenta, držite ručku pričvršćenu na kanilu.

OPREZ: Pri uklanjanju, **NE** odvajajte ručku od kanile. Ako je kanila tromboembolija, to bi moglo izazvati povratni protok krvi kroz kanilu i ponovo uvođenje tromboembolije.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

BRZ REFERENTNI VODIČ

ifu.angiodynamics.com

19903658-17 Rev. A 03/2024

AngioDynamics, logotip AngioDynamics, NanoKnife i logotip NanoKnife trgovačke su oznake i/ili registrirane trgovačke oznake AngioDynamics, Inc., s njom povezanog društva ili njezine podružnice.

© 2024 AngioDynamics, Inc. ili njezina povezana društva. Sva su prava pridržana.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

BRZ REFERENTNI VODIČ

- 1** PRIPREMA SKLOP OBTURATORA I UVODNICE
- 2** PRIPREMA POSTAVLJANJE UVODNICE U PACIJENTA
- 3** PRIPREMA PRIPREMA SKLOPA RUČKE
- 4** PRIPREMA UMETNITE KANILU I PRIPREMITE SUSTAV
- 5** RAD UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJE
- 6** RAD UKLANJANJE SUSTAVA IZ PACIJENTA

VAŽNO: prije uporabe proizvoda pogledajte upute za uporabu isporučene s proizvodom za potpune indikacije, upute, upozorenja, predostrožnosti, moguće nuspojave i kontraindikacije.