

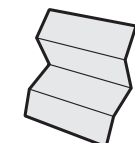


OPTURATOR

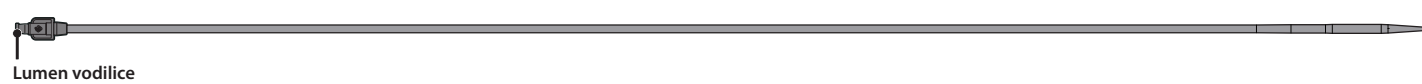


AlphaVac QRG
(potpuno rasklopite i pregledajte obe strane)


KANILA

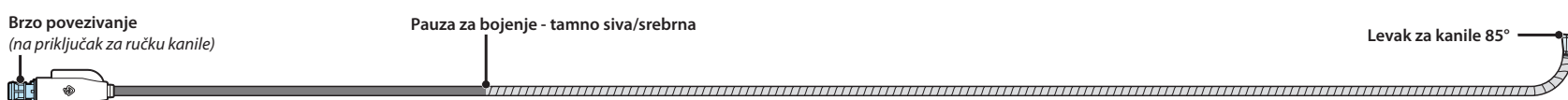


OMOTAČ

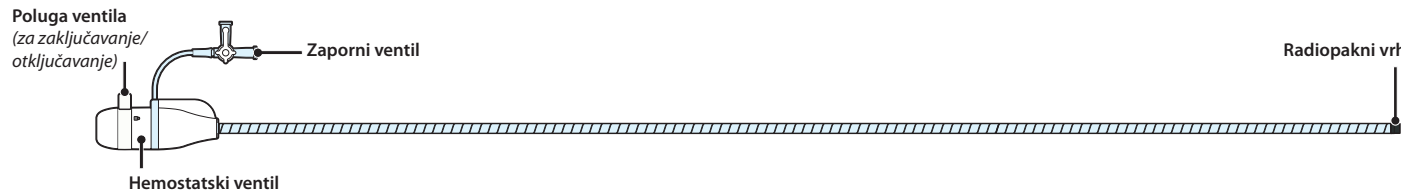


RUČKA

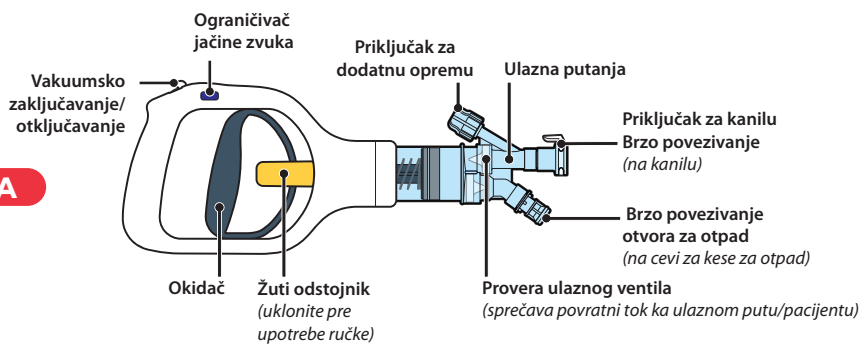

CEVI ZA KESE ZA OTPAD

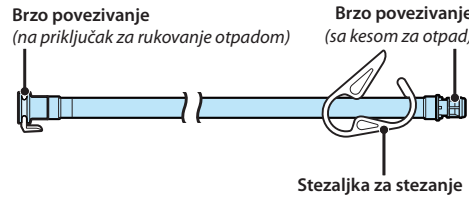


VREĆA ZA OTPAD

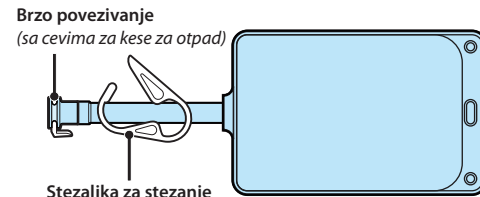

PRIPREMA


SKLOP OPTURATORA I OMOTAČA

Podešavanje/Priprema

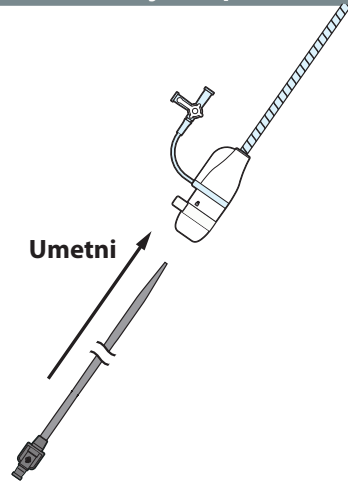


Umetnite opturator u omotač

- Potpuno umetnite opturator u omotač.

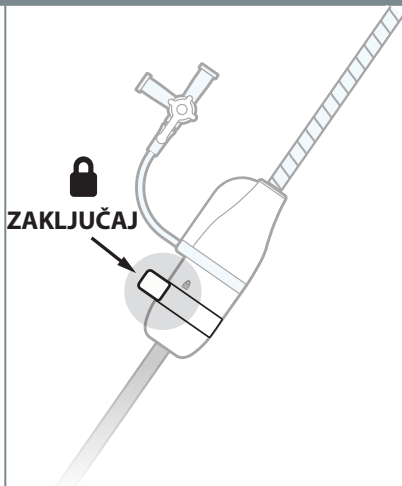

Poluga sigurnosnog ventila

- ZAKLJUČAJTE ručicu ventila.

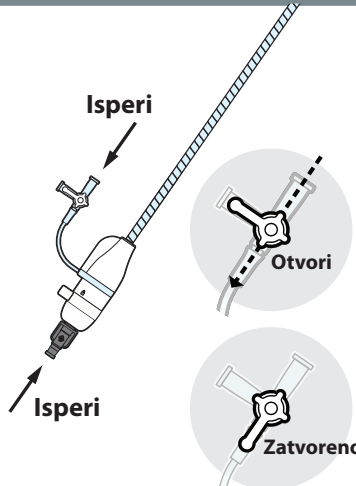

Vodilica za ispiranje Lumen i zaporni ventil

- Isperite lumen vodilice.
- Isperite i zatvorite zaporni ventil na omotaču.

Proverite pre primopredaje →

Sklop omotača i opturatora je spreman za postavljanje kod pacijenta kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE

- Opturator se ubacuje u omotač.
- Poluga ventila je zaključana.
- I lumen vodilice i zaporni ventil su isprani.
- Zaporni ventil je zatvoren.


Spremlno za lekara da smesti u pacijenta



PRIPREMA


POSTAVLJANJE OMOTAČA U PACIJENTA

Lekar

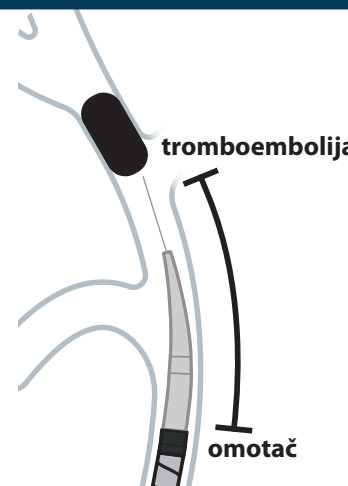


Uvesti i postaviti omotač kod pacijenta

- Uvedite omotač/opturator.
- Postavite vrh omotača u područje bez tromboembolija za ekstrakciju (ovaj položaj omogućava širenje levka pre aspiracije).

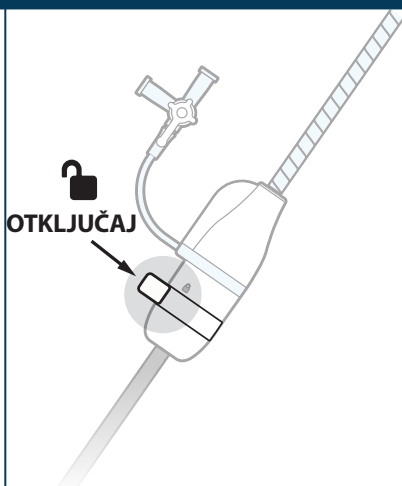

Poluga za otključavanje ventila

- OTKLJUČAJTE ručicu ventila.

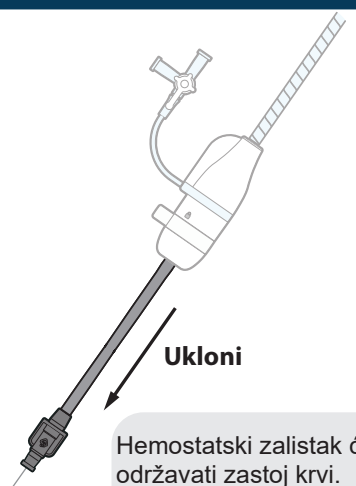

Uklonite opturator i vodilicu

- Dok držite omotač u položaju, uklonite zatvarač i žicu vodilicu. Omotač treba da ostane u pacijentu.

Navlaka je spremna za prijem kanile i ručke kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE

- Omotač je pozicioniran dalje od tromboembolija.
- Zatvarač i vodilica se uklanjaju iz omotača.


Omotač je spreman za prijem kanile i ručke



PRIPREMA


UGRADNJA RUČKE ZA PRIPREMU

Podešavanje/Priprema

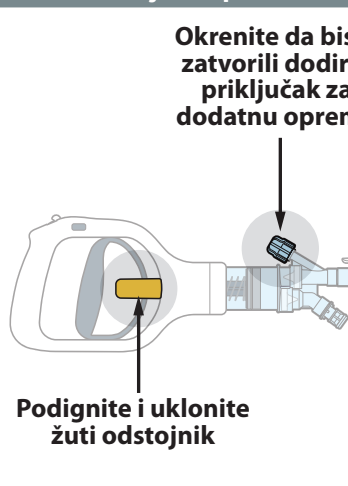

Zatvorite dodirni i uklonite žuti odstojnik

- Zatvorite priključak za dodatnu opremu.
- Podignite i uklonite žuti odstojnik.

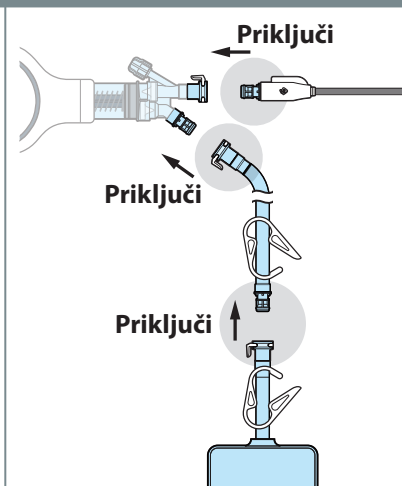

Povežite kanile, cevi za otpad i kesu

- Povežite kanilu sa ručkom.
- Priključite cevi za otpad na rukovanje.
- Priključite kesu za otpad na cevi.

Sklop ručke AlphaVac je spreman za lekara kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE


- Priključak za dodatnu opremu je zatvoren.
- Uklonjen je žuti odstojnik.
- Na ručku su povezani kanila, cev za kese za otpad i kesu za otpad.

Sklop ručke je spreman za lekara



Proverite pre primopredaje →

Rasklopite u potpunosti i pregledajte obe strane

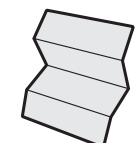

PRIPREMA 4 UMETANJE KANILE I GLAVNOG SISTEMA

Lekar

Umetnite kanilu u omotač

- Proverite ili otključajte ručicu ventila.
- Držite omotač u prostoru bez tromboembolija za ekstrakciju.
- Umetnite kanilu u omotač do tamno sivog dela i dok srebrni deo više ne bude vidljiv.

Umetnite kanilu

Umetnite do tamno sivog dela i srebrni deo više nije vidljiv

NEMOJTE izvlačiti levak iz omotača dok se priprema ne završi.

OPREZ: Izvlačenje levka iz omotača pre pripreme može uvesti vazduh i ugroziti pacijenta. Držite levak unutar omotača dok se priprema ne završi.

ZAKLJUČAJ

Poluga sigurnosnog ventila

- ZAKLJUČAJTE ručicu ventila.

Zaporni ventil za aspiraciju i ispiranje omotača

- Usisajte vazduh iz zapornog ventila, zatim isperite i zatvorite zaporni ventil.

Aspirirajte i isperite

Otvori

Zatvoreno

Otvorite dodirni priključak za dodatnu opremu kako biste omogućili ispuštanje

Zatvorite otvor kada dođe do ispuštanja

Otvoravanje/zatvaranje dodirnog otvora za odzračivanje

- Otvorite dodirni priključak za dodatnu opremu.
- Dozvolite da se ispuštanje vrati preko porta.
- Zatvorite port.

AlphaVac sistem je pripremljen i spreman za rad kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE

- Kanila se ubacuje u omotač do tamnosivog dela.
- Poluga ventila je zaključana.
- Zaporni ventil je usisan, ispran i zatvoren.
- Izvršeno je ispuštanje preko priključka za dodirivanje dodatne opreme.
- Priključak za dodatnu opremu je zatvoren.

AlphaVac sistem je spreman za rad



RUKOVANJE 5 UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJE

Lekar

OTKLJUČAJ

Napredni levak kanile

ZAKLJUČAJ

Levak za avansno plaćanje

- OTKLJUČAJTE ručicu ventila.
- Napredni levak za kanilu.
- ZAKLJUČAJTE ručicu ventila.

Idite na i uključite tromboemboliju

- Idite do tromboembolija.
- Ručno povucite okidač ručke po potrebi, koristeći kontrolisano kretanje, da biste postepeno aktivirali tromboemboliju.

Kada je tromboembolija uključena

- Nastavite da ručno pumpate koristeći podešavanje na 10 cc (ml) ili 30 cc (ml).
- Ili koristite vakuumsko zaključavanje (pogledajte sledeću sliku).

Korišćenje vakuumnog zaključavanja (koristite samo kada je kanila začepljena)

- Tromboembolija mora biti aktivirana.
- Koristite podešavanje od 30 cc (ml) uključite vakuumsko zaključavanje.
- Nastavite da pratite proceduru.

Povlačenje okidača unazad

Aktivirajte vakuumsko zaključavanje

- **OPREZ:** Otvoravanje priključka za dodatnu opremu tokom vakuuma može uvesti vazduh u sistem i ugroziti pacijenta. Budite oprezni prilikom otvaranja priključka za dodatnu opremu kako biste izbegli unošenje vazduha u sistem.

RUKOVANJE 6 UKLANJANJE SISTEMA IZ PACIJENTA

Lekar

OTKLJUČAJ

Levak za uvlačenje kanile

ZAKLJUČAJ

Levak za uvlačenje

- OTKLJUČAJTE ručicu ventila.
- Povucite kanilu unazad tako da se levak potpuno uvuče unutar omotača.
- ZAKLJUČAJTE ručicu ventila.

Uklonite sistem

- Držite ručku pričvršćenu za kanilu prilikom uklanjanja sistema sa pacijenta.

OPREZ: Prilikom uklanjanja, NEMOJTE odvajati ručku od kanile. Ako u kanili ima tromboembolija, to može dovesti do povratnog protoka krvi kroz kanile i ponovnog uvođenja tromboembolija.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

KRATKI REFERENTNI VODIČ

ifu.angiodynamics.com

19903658-19 Rev A 03/2024

AngioDynamics, logotip AngioDynamics, AlphaVac i AlphaVac logotip su zaštitni znaci i/ili registrovani zaštitni znaci kompanije AngioDynamics, Inc., filijale ili podružnice.

© 2024 AngioDynamics, Inc. ili filijale ove kompanije. Sva prava zadržana.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

KRATKI REFERENTNI VODIČ

- 1 PRIPREMA SKLOPA OPTURATORA I OMOTAČA**
- 2 PRIPREMA POSTAVLJANJA OMOTAČA KOD PACIJENTA**
- 3 PRIPREMA UGRADNJE RUČKE ZA PRIPREMU**
- 4 PRIPREMA UMETKA KANILE I GLAVNOG SISTEMA**
- 5 OPERATIVNO UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJE**
- 6 RUKOVANJE SISTEMOM ZA UKLANJANJE IZ PACIJENTA**

VAŽNO: Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju uz proizvod za kompletne indikacije, uputstva, upozorenja, mere predostrožnosti, moguće neželjene efekte i kontraindikacije pre upotrebe proizvoda.