


OBTURAATTORI




KANYYYLI




HOLKKI

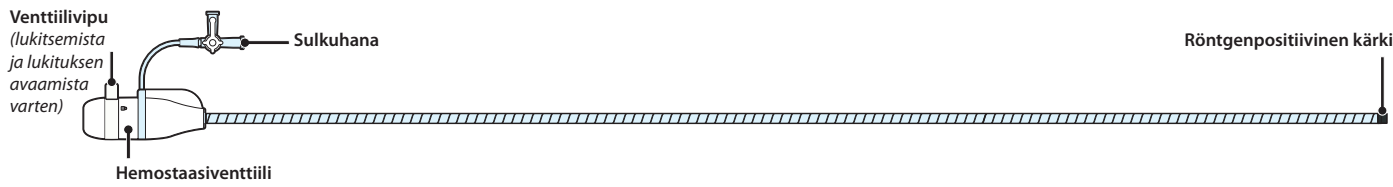


KAHVA

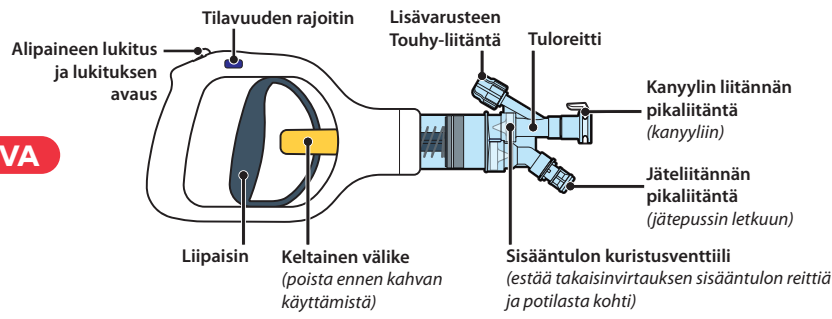

JÄTEPUSSIN LETKU

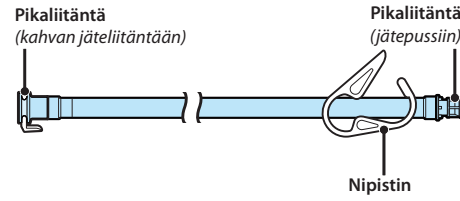

JÄTEPUSSI

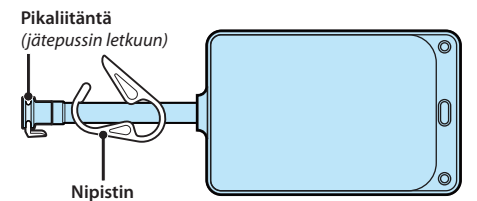


AlphaVac QRG
(taita kokonaan auki
ja tutustu kumpaankin
puoleen)

VALMISTELU


OBTURAATTORIN JA HOLKIN KOKOONPANO

Valmistelu/valmistelija

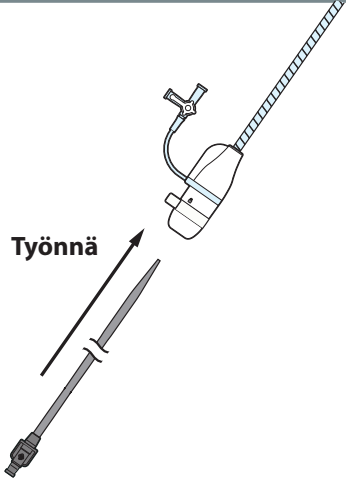


Työnnä obturaattori holkkiin

- Työnnä obturaattori holkin sisään.

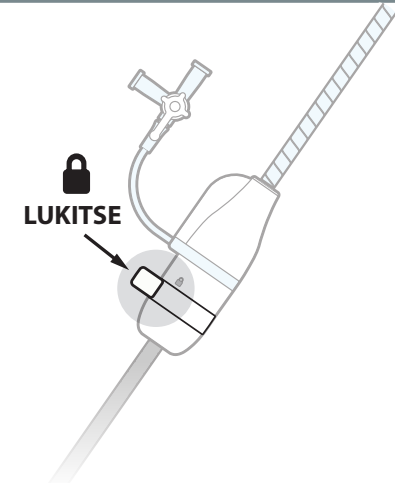

Lukitse venttiilivipu

- LUKITSE venttiilivipu.

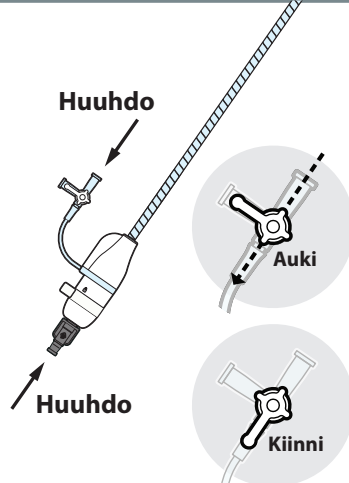

Huuho ohjainvaijerin luumen ja sulkuhana

- Huuhdo ohjainvaijerin luumen.
- Huuhdo ja sulje holkin sulkuhana.

Tarkista ennen luovuttamista →

Holkin ja obturaattorin kokoonpano on valmis asetettavaksi potilaaseen, kun

TARKISTA JA VARMISTA

- obturaattori on työnnetty holkin sisään
- venttiilivipu on lukittu
- sekä ohjainvaijerin luumen että sulkuhana on huuhdottu
- sulkuhana on suljettu.


Valmis lääkärin asetettavaksi potilaaseen



VALMISTELU


HOLKIN ASETTAMINEN POTILAASEEN

Lääkäri / terveydenhuollon ammattilainen

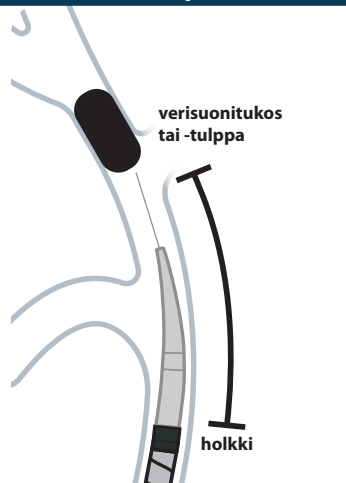


Holkin vieminen ja asettaminen potilaaseen

- Vie holkki/obturaattori sisään.
- Aseta holkin kärki alueelle, jolla ei ole poistettavaa verisuonitukosta tai -tulpaa (tässä kohdassa suppilo voidaan laajentaa ennen aspirointia).

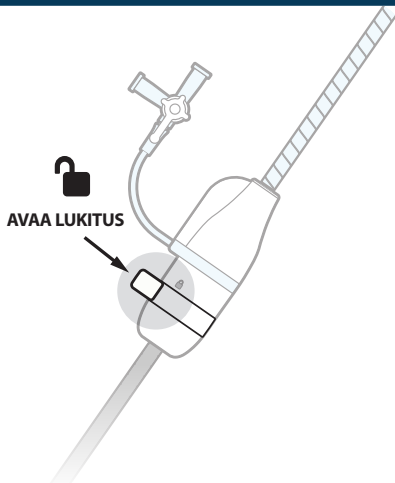

Avaa venttiilivivun lukitus

- AVAA venttiilivivun lukitus.

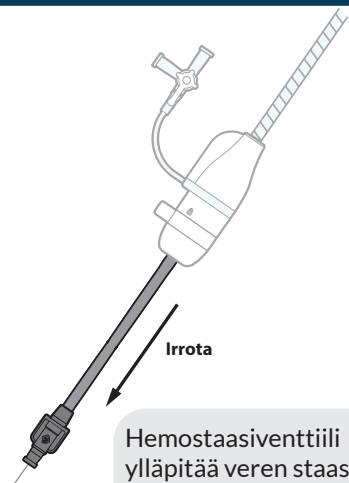

Irrota obturaattori ja ohjainvaijeri

- Pidä holkki paikallaan ja poista samalla obturaattori ja ohjainvaijeri. Holkin pitää jäädä potilaaseen.

Holkki on valmis ottamaan vastaan kanyyliin ja kahvan, kun

TARKISTA JA VARMISTA

- holkki on sijoitettu pois päin verisuonitukoksesta tai -tulpasta
- obturaattori ja ohjainvaijeri on irrotettu holkista.


Holkki on valmis ottamaan vastaan kanyylin ja kahvan



VALMISTELU


KAHVAKOKOONPANOON VALMISTELU

Valmistelu/valmistelija

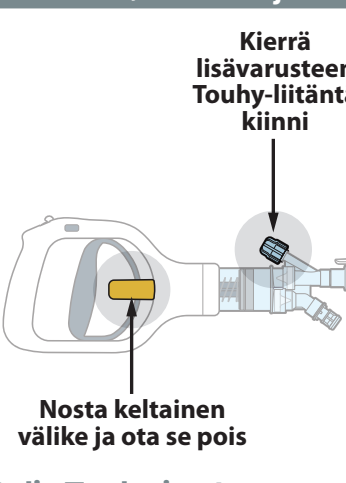

Sulje Touhy ja ota keltainen välike pois

- Sulje lisävarusteen Touhy-liitäntä.
- Nosta keltainen välike ja ota se pois.

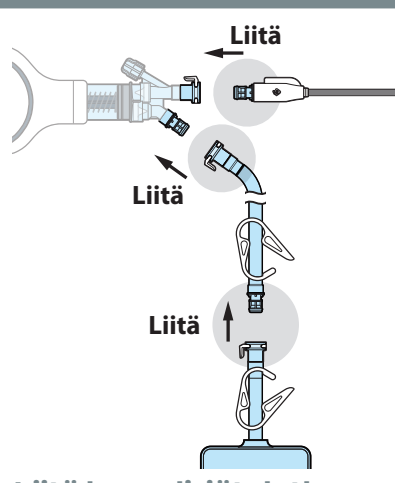

Liitä kanyyli, jäteletku ja -pussi

- Liitä kanyyli kahvaan.
- Liitä jäteletku kahvaan.
- Liitä jätepussi letkuun.

AlphaVac-kahvakokoonpano on valmis lääkärin varten, kun

TARKISTA JA VARMISTA

- lisävarusteen Touhy-liitäntä on suljettu
- keltainen välike on poistettu
- kanyyli, jätepussin letku ja jätepussi on kytketty kahvaan.

Kahvakokoonpano on valmis lääkärin varten




Tarkista ennen luovuttamista →

Taita kokonaan auki ja tutustu
kumpaankin puoleen

4 VALMISTELU

VIE KANYILI SISÄÄN JA ESITÄYTÄ JÄRJESTELMÄ

Lääkäri / terveydenhuollon ammattilainen

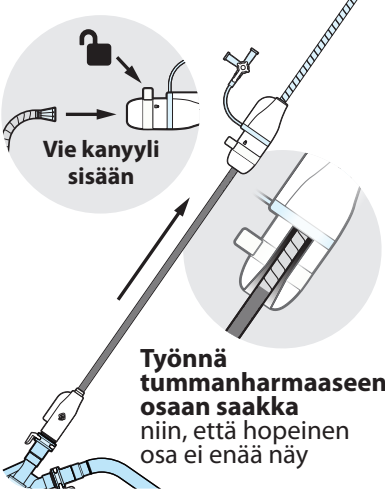


Työnnä kanyyli holkin sisään

- Tarkista venttiilivipu tai avaa sen lukitus.
- Pidä holkki kohdassa, jossa ei ole verisuonitukostai -tulppaa, jotta sen voi poistaa.
- Työnnä kanyyli holkin sisään tummanharmaaseen osaan saakka, kunnes hopeinen osa ei enää näy.

ÄLÄ pidennä suppiloa ulos holkista, ennen kuin esitäyttö on valmis.


HUOMIO:

Suppilon pidentäminen ulos holkista ennen esitäyttöä voi päästää sisään ilmaa ja vaarantaa potilaan. Pidä suppilo holkin sisällä, kunnes esitäyttö on valmis.

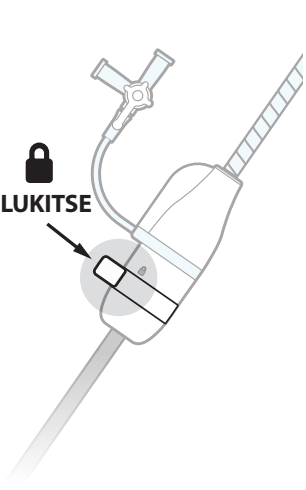


Lukitse venttiilivipu

- LUKITSE venttiilivipu.

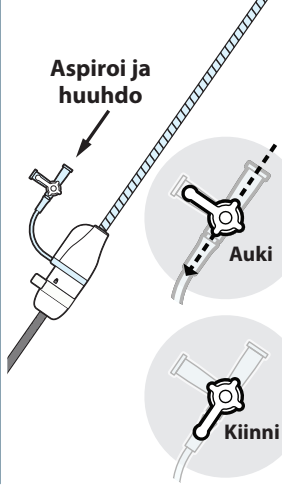

Aspiroi ja huuhto sulkuhana

- Aspiroi ilma sulkuhanasta ja huuhto ja sulje sulkuhana.

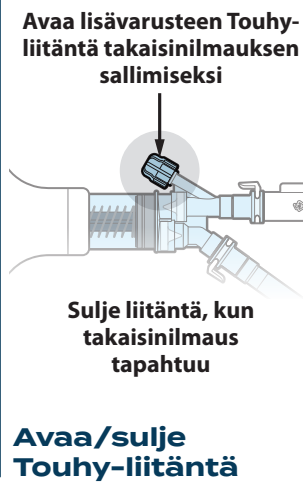

Avaa lisävarusteen Touhyliitäntä takaisinilmauksen sallimiseksi

Sulje liitäntä, kun takaisinilmaus tapahtuu

Avaa/sulje Touhyliitäntä takaisinilmausta varten

- Avaa lisävarusteen Touhyliitäntä.
- Salli takaisinilmaus liitännän kautta.
- Sulje liitäntä.

AlphaVac-järjestelmä on esitäytetty ja valmis käytettäväksi, kun

TARKISTA JA VARMISTA

- kanyyli on työnnetty holkin sisään tummanharmaaseen osaan saakka
- venttiilivipu on lukittu
- sulkuhana on aspiroitu, huuhdottu ja suljettu
- lisävarusteen Touhyliitännän kautta on tehty takaisinilmaus
- lisävarusteen Touhyliitäntä on suljettu.


AlphaVac-järjestelmä on valmis käytettäväksi



5 KÄYTTÖ


VERISUONITUKOKSEN TAI -TULPAN POISTAMINEN

Lääkäri / terveydenhuollon ammattilainen

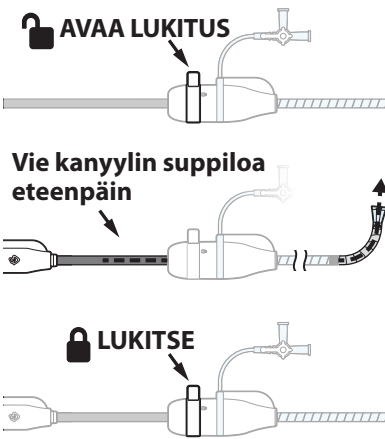


Vie suppilo eteenpäin

- AVAA venttiilivivun lukitus.
- Vie kanyylin suppiloa eteenpäin.
- LUKITSE venttiilivipu.

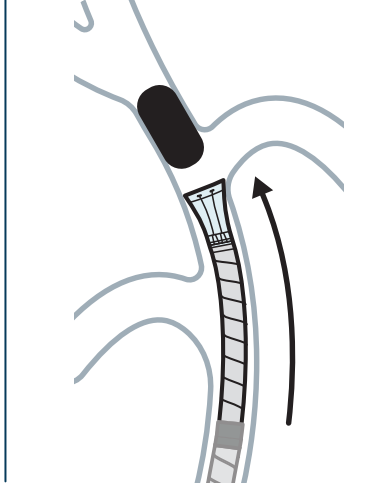


Siirry verisuonitukoksen tai -tulpan kohdalle ja kytkeydy siihen

- Siirry verisuonitukoksen tai -tulpan kohdalle.
- Vedä kahvan liipaisinta kädellä taakse tarpeen mukaan käyttäen hallittua liikettä niin, että saat kytkettyä järjestelmän vähitellen verisuonitukokseen tai -tulppaan.

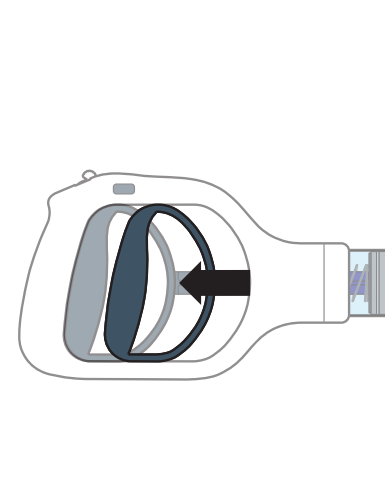

Kun järjestelmä on kytketty verisuonitukokseen tai -tulppaan

- Jatka manuaalista pumpausta käyttämällä joko asetusta 10 cc (ml) tai 30 cc (ml)
- tai käytä alipaineen lukitusta (katso seuraava kuva).

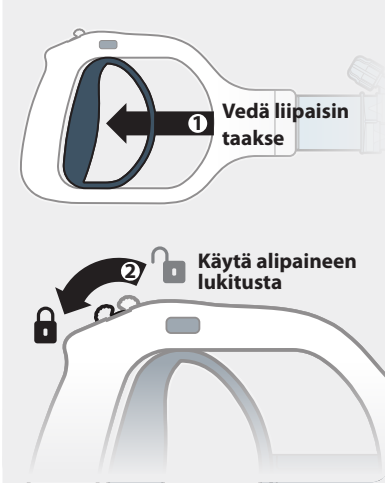

Alipaineen lukituksen käyttö (käytä vain, kun kanyyli on tukossa)


- Järjestelmä on kytkettävä verisuonitukokseen tai -tulppaan.
- Käytä 30 cc (ml) -asetusta ja käytä alipaineen lukitusta.
- Jatka toimenpiteen tarkkailua.

- **HUOMIO:** Lisävarusteen Touhyliitännän avaaminen alipaineen käytön aikana voi aiheuttaa ilman pääsyn järjestelmään ja vaarantaa potilaan. Käytä varoen, kun avaat lisävarusteen Touhyliitäntää, jotta järjestelmään ei pääse ilmaa.

6 KÄYTTÖ

JÄRJESTELMÄN IRROTTAMINEN POTILAASTA

Lääkäri / terveydenhuollon ammattilainen

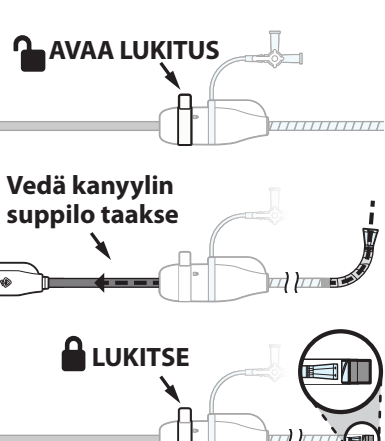

Vedä suppilo taakse

- AVAA venttiilivivun lukitus.
- Vedä kanyyliä taaksepäin niin, että saat vedettyä suppilon kokonaan takaisin holkin sisään.
- LUKITSE venttiilivipu.



Irrota järjestelmä

- Pidä kahva kiinnitettyinä kanyyliin, kun järjestelmä poistetaan potilaasta.

HUOMIO: poistamisen aikana kahvaa **EISAA** irrottaa kanyylistä. Jos kanyylissä on verisuonitukos tai -tulppa, se voi aiheuttaa veren takaisinvirtauksen kanyylin läpi ja tukoksen tai tulpan pääsyn takaisin kehoon.



ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

PIKAOPAS

ifu.angiodynamics.com

19903658-28, versio A 03/2024

AngioDynamics ja AngioDynamics-logo, AlphaVac ja AlphaVac-logo ovat AngioDynamics, Inc:n ja sen ala- tai tytäryrityksen tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2024 AngioDynamics, Inc. tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com




ALPHAVAC
 MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

PIKAOPAS

- 1 **VALMISTELU**
OBTURAATTORIN JA HOLKIN KOKOONPANO
- 2 **VALMISTELU**
HOLKIN ASETTAMINEN POTILAASEEN
- 3 **VALMISTELU**
KAHVAKOKOONPANOVALMISTELU
- 4 **VALMISTELU**
KANYYLIN VIEMINEN SISÄÄN JA JÄRJESTELMÄN ESITÄYTÖ
- 5 **KÄYTTÖ**
VERISUONITUKOKSEN TAI -TULPAN POISTAMINEN
- 6 **KÄYTTÖ**
JÄRJESTELMÄN POISTAMINEN POTILAASTA

TÄRKEÄÄ: Katso täydelliset käyttöaiheet, ohjeet, varoitukset, varotoimet, mahdolliset haittatapahtumat ja vasta-aiheet tuotteen mukana toimitetuista käyttöohjeista ennen tuotteen käyttämistä.