

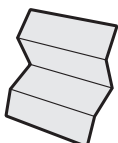


OBTURATOR

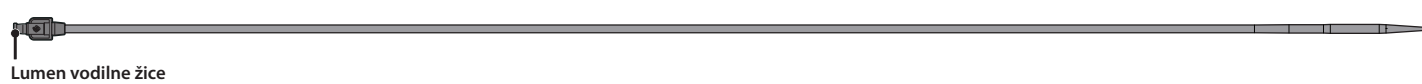


AlphaVac QRG
(Popolnoma odprite in preglejte obe strani)


KANILA

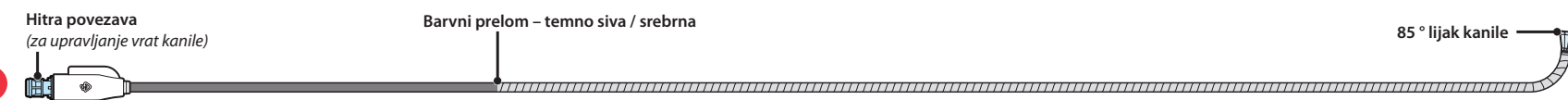


UVAJALNA CEVKA

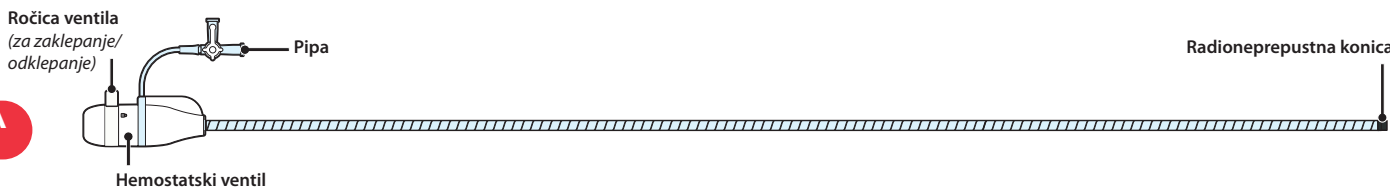


ROČAJ

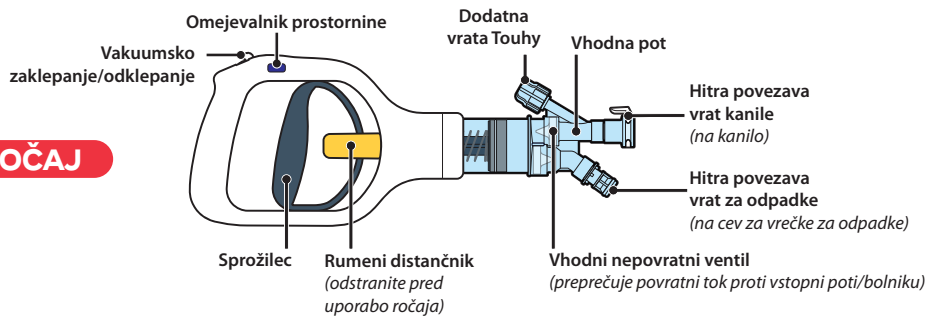


VOD ZA ODPADKE

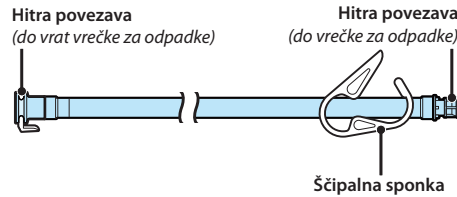

VREČKA ZA ODPADKE

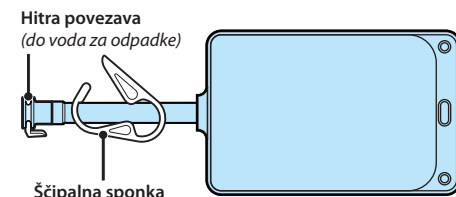


Nastavitev/priprava

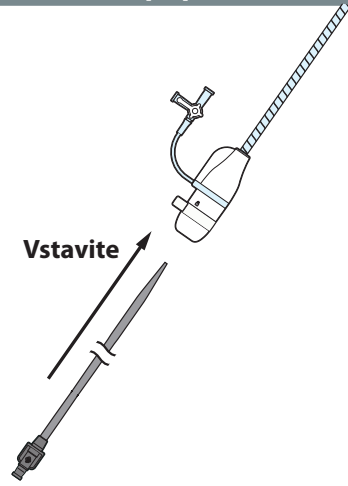


Vstavite obturator v uvajalno cevko

- Obturator do konca vstavite v uvajalno cevko.

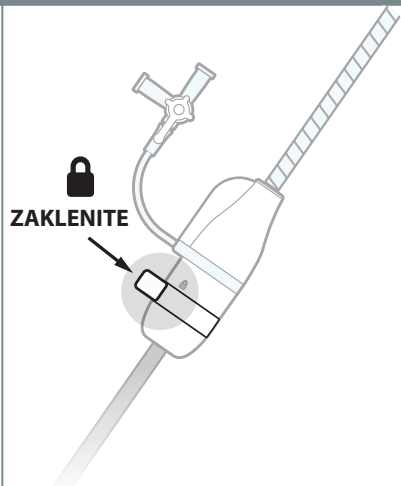

Zaklenite ročico ventila

- ZAKLENITE ročico ventila.

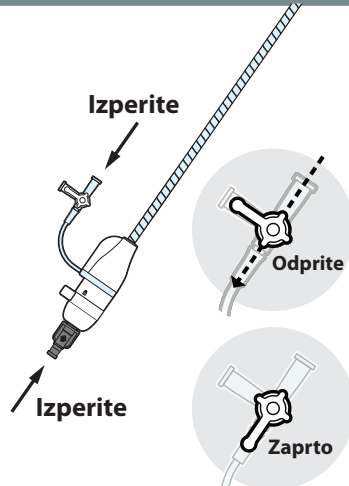

Izperite lumen vodilne žice in zaporno pipo

- Izperite lumen vodilne žice.
- Izperite in zaprite zaporno pipo na uvajalni cevki.

Sklop uvajalne žice in obturatorja je pripravljen za namestitev v bolnika, ko:

PREVERITE IN ZAGOTOVITE


- Obturator je vstavljen v ovojo.
- Ročica ventila je zaklenjena.
- Lumen vodilne žice in zaporna pipa sta izprana.
- Zaporna pipa je zaprta.

Pripomoček je pripravljen, da ga zdravnik vstavi v pacienta




Preverite pred predajo →

Zdravnik/praktik

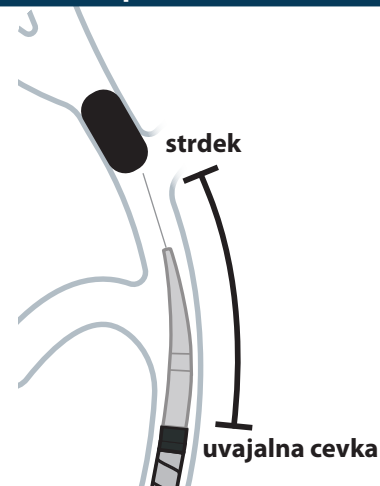


Uvedite in namestite uvajalno cevko v bolnika

- Uvedite uvajalno cevko/obturator.
- Postavite konico uvajalne cevke na območje brez strdkov za ekstrakcijo (ta položaj omogoča razširitev lijaka pred aspiracijo).

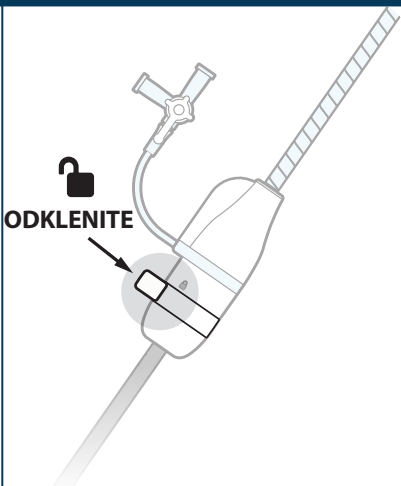

Odklenite ročico ventila

- ODKLENITE ročico ventila.

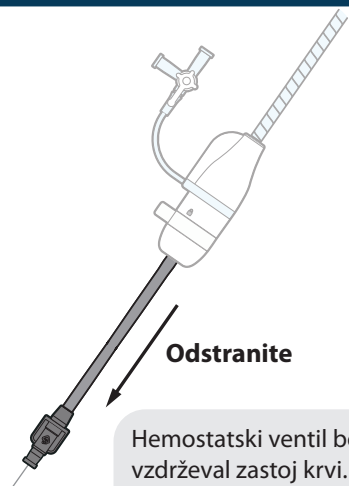

Odstranite obturator in vodilno žico

- Medtem ko držite uvajalno cevko na mestu, odstranite obturator in vodilno žico. Uvajalna cevka naj ostane v bolniku.

Uvajalna cevka je pripravljena za sprejem kanile in ročaja, ko:


PREVERITE IN ZAGOTOVITE

- Uvajalna cevka je nameščena stran od strdkov.
- Obturator in vodilna žica sta odstranjena iz ovoja.

Uvajalna cevka je pripravljena do sprejem kanile in ročaja




Nastavitev/priprava

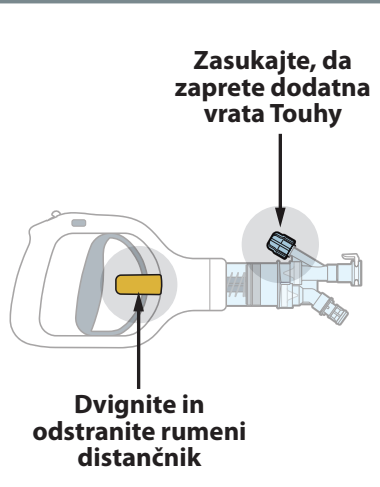

Zaprte vrata Touhy in odstranite rumeni distančnik

- Zaprite dodatna vrata Touhy.
- Dvignite in odstranite rumeni distančnik.

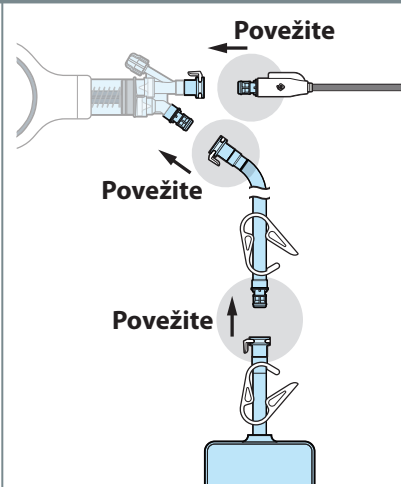

Povežite kanilo, cev za odpadke in vrečko

- Priključite kanilo na ročaj.
- Priključite cev za odpadke na ročaj.
- Priključite vrečko za odpadke na cev.

Sklop ročaja AlphaVac je pripravljen za zdravnika, ko:

PREVERITE IN ZAGOTOVITE


- Dodatna vrata Touhy so zaprta.
- Odstranjen je rumeni distančnik.
- Kanila, cev vrečke za odpadke in vrečka za odpadke so povezani z ročajem.

Sklop ročaja je pripravljen za zdravnika




Preverite pred predajo →

Popolnoma odprite in preglejte obe strani

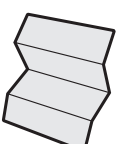

4 PRIPRAVA VSTAVITE KANILO IN NAPOLNITE SISTEM

Zdravnik/praktik

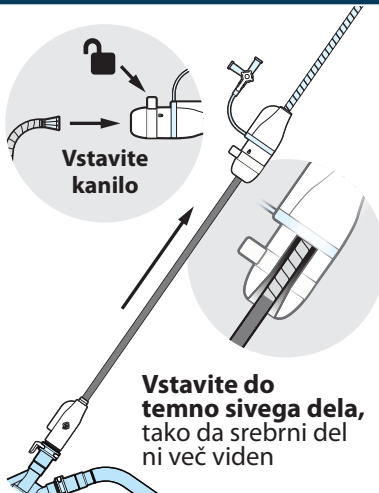


Vstavite kanilo v uvajalno cevko

- Preverite ali odklenite ročico ventila.
- Za ekstrakcijo hranite uvajalno cevko na mestu brez strdkov.
- Vstavite kanilo v uvajalno cevko do temno sivega dela, tako da srebrni del ni več viden.


NE podaljšajte lijaka iz uvajalne cevke, dokler ni končano polnjenje.

POZOR: Podaljšanje lijaka iz uvajalne cevke pred polnjenjem lahko vnese zrak in ogrozi bolnika. Držite lijak v uvajalni cevki, dokler ni končano polnjenje.

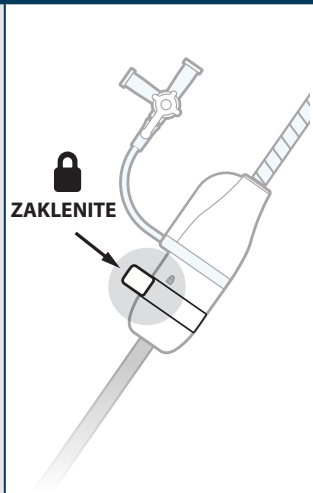


Zaklenite ročico ventila

- ZAKLENITE ročico ventila.

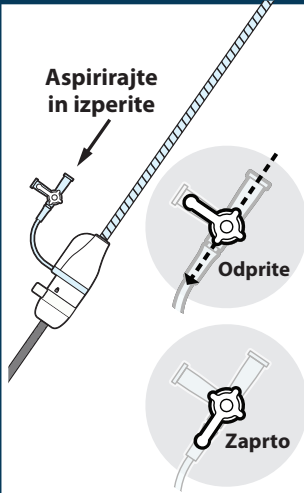

Aspirirajte in izperite zaporno pipo uvajalne cevke

- Aspirirajte zrak iz zaporne pipe, nato izperite in zaprite zaporno pipo.

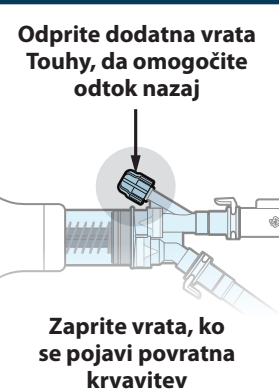

Odprite/zaprte dodatna vrata Touhy za povratno krvavitev

- Odprite dodatna vrata Touhy.
- Dovolite povratno krvavitev nazaj skozi vrata.
- Zaprite vrata.

Sistem AlphaVac je napolnjen in pripravljen za delovanje, ko:

PREVERITE IN ZAGOTOVITE


- Kanila je vstavljena v uvajalno cevko do temno sivega dela.
- Ročica ventila je zaklenjena.
- Zaporna pipa je bila aspirirana, izprana in zaprta.
- Izveden je bil povratna krvavitev prek dodatnih vrat Touhy.
- Dodatna vrata Touhy so zaprta.

Sistem AlphaVac je pripravljen za uporabo




5 UPORABA ODSTRANJEVANJE STRDKOV

Zdravnik/praktik

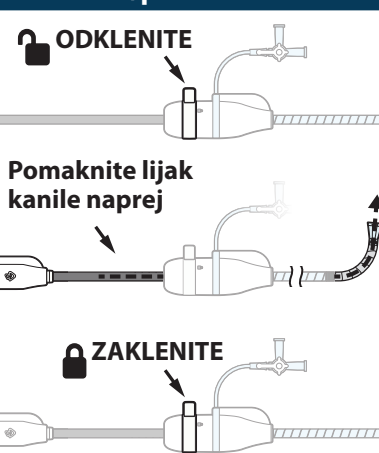


Pomaknite lijak naprej

- ODKLENITE ročico ventila.
- Pomaknite lijak kanile naprej.
- ZAKLENITE ročico ventila.

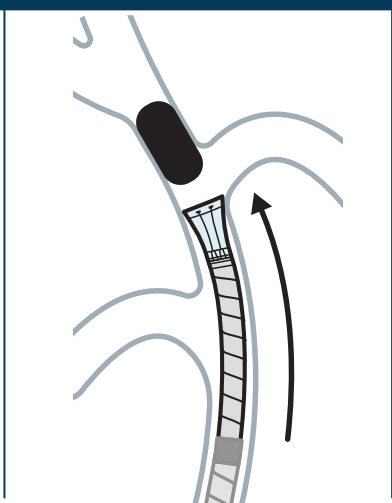

Pomaknite se in zajemite strdek

- Pomaknite se do strdka.
- Po potrebi ročno povlecite sprožilec ročaja z nadzorovanim gibom, da postopoma zajamete strdek.

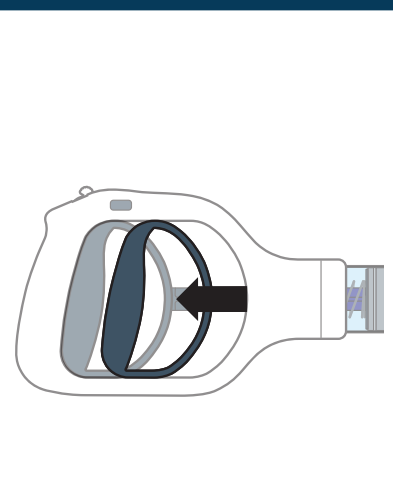

Ko je strdek zajet

- Nadaljujte z ročnim črpanjem z nastavitvijo na 10 cc (ml) ali 30 cc (ml).
- ali uporabite vakuumsko zaporo (glejte naslednjo sliko).



Uporaba vakuumske zapore


(uporabite le, ko je kanila zamašena)

- Treba je zajeti strdek.
- Uporabite nastavev 30 cc (ml) in vključite vakuumsko zaporo.
- Nadaljujte s spremljanjem postopka.

- **POZOR:** Odpiranje dodatnih vrat Touhy za dodatno opremo med vakuumom lahko vnese zrak v sistem in ogrozi bolnika. Bodite previdni, ko odpirate dodatna vrata Touhy, da preprečite vnos zraka v sistem.

6 UPORABA ODSTRANJEVANJE SISTEMA IZ BOLNIKA

Zdravnik/praktik

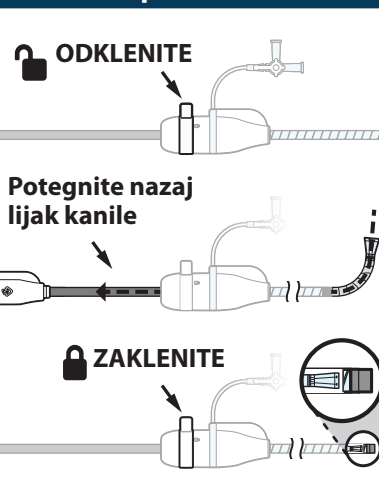

Izvlomite lijak

- ODKLENITE ročico ventila.
- Povlecite kanilo nazaj, tako da je lijak popolnoma umaknjen znotraj uvajalne cevke.
- ZAKLENITE ročico ventila.



Odstranite sistem

- Ko odstranjujete sistem iz bolnika, naj bo ročaj pritrjen na kanilo.

POZOR: Pri odstranjevanju, **NE** odklopite ročaja s kanile. Če je v kanili strdek, lahko pride do povratnega toka krvi skozi kanilo in ponovnega vnosa strdka.



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

HITRI REFERENČNI PRIROČNIK

ifu.angiodynamics.com

19903658-32 Rev A 03/2024

AngioDynamics, logotip AngioDynamics, AlphaVac in logotip AlphaVac so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe AngioDynamics, Inc ter povezanih ali hčerinskih podjetij.

© 2024 AngioDynamics, Inc ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446



AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

HITRI REFERENČNI PRIROČNIK

- 1 PRIPRAVA**
SKLOP OBTURATORJA IN
UVAJALNE CEVKE
- 2 PRIPRAVA**
NAMESTITEV UVAJALNE CEVKE
V BOLNIKA
- 3 PRIPRAVA**
PRIPRAVA SKLOPA ROČAJA
- 4 PRIPRAVA**
VSTAVITE KANILO IN NAPOLNITE
SISTEM
- 5 UPORABA**
ODSTRANJEVANJE STRDKOV
- 6 UPORABA**
ODSTRANJEVANJE SISTEMA IZ
BOLNIKA

! POMEMBNO: Pred uporabo izdelka, za popolne indikacije, navodila, opozorila, previdnostne ukrepe, možne neželene učinke in kontraindikacije, preberite navodila za uporabo, ki so priložena izdelku.