


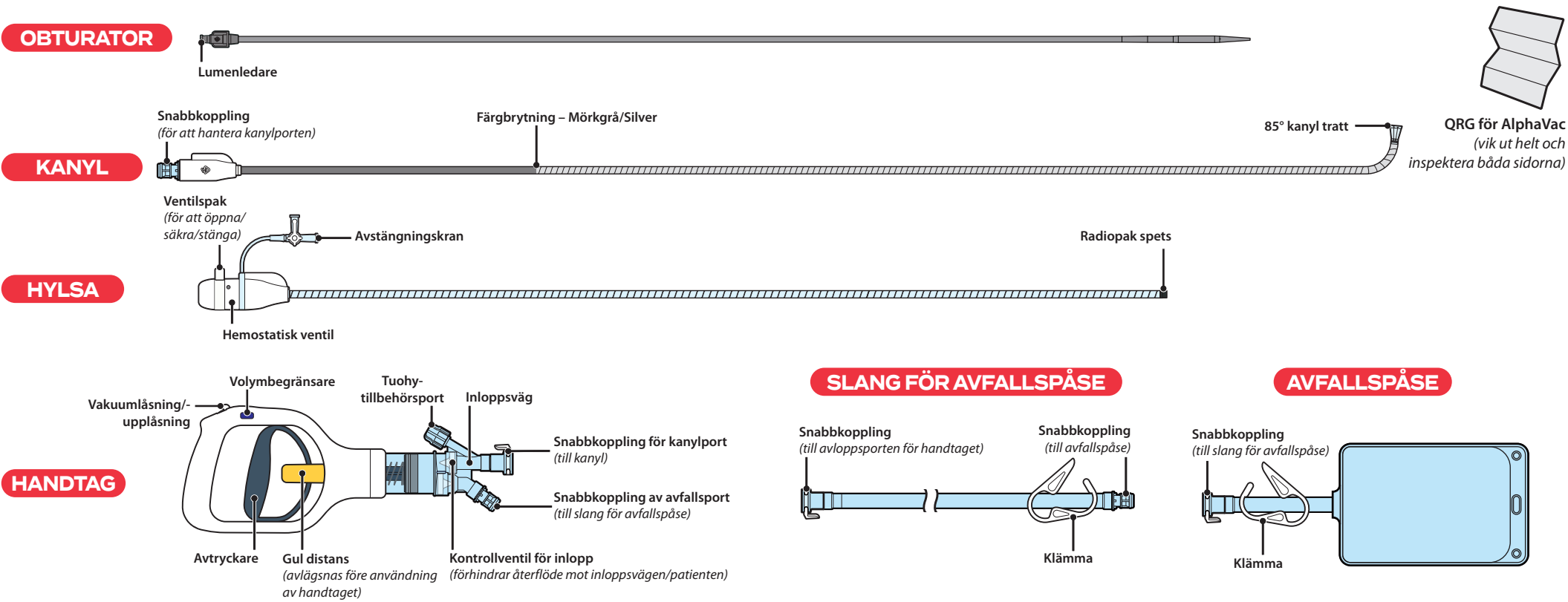

Förberedelse

För in obturatorn i hylsan

För in

- För in obturatorn helt och hållet i hylsan.

Säkra låsventil

SÄKRA

- Vrid ventilspaken till säkert-läge för att säkra obturatorn.

Spola ledarens lumen och stoppkran

Spola

Spolning

Öppen

Stängd

- Spola ledarens lumen.
- Spola och stäng stoppkranen på hylsan.

Kontrollera före överlämning →

- Hylsan och obturatorn är redo att sättas in i patienten:
- KONTROLLERA OCH SÄKERSTÄLL**
- Obturatorn förs in i hylsan.
 - Ventilspaken är säkrad.
 - Både ledarens lumen och stoppkranen spolas.
 - Stoppkranen är stängd.
- Redo för läkaren att sätta in i patienten**



Läkare/praktiserande läkare

Introducera och placera hylsan i patienten

tromboemboli

hylsa

- För in hylsan/obturatorn.
- Placera hylsans spets i ett område fritt från tromboembolier för extraktion (denna position gör det möjligt att expandera tratten före aspiration).

Öppna ventilspaken

ÖPPNA

- Öppna ventilspaken.

Ta bort både obturatorn och styrtråden eller bara obturatorn

Avlägsna

- Medan du håller hylsan på plats, ta bort både obturatorn och styrtråden eller bara obturatorn. Hylsan ska vara kvar i patienten.
- Om styrtråden finns kvar i patienten, vrid ventilspaken till stängt läge. Om styrtråden tas bort med obturatorn, upprätthåller den hemostatiska ventilen blodstas.

Kontrollera före överlämning →

- Hylsan är redo för att ta emot kanyl och handtaget när:
- KONTROLLERA OCH SÄKERSTÄLL**
- Hylsan är sitter på avstånd från tromboembolier.
 - Både obturatorn och ledaren eller bara obturatorn avlägsnas från hylsan.
- Hylsan är redo att ta emot kanyl och handtag**



Förberedelse

Stäng Tuohy-porten och ta bort den gula distansen

Vrid för att stänga tuohy-tillbehörsport

Lyft och ta bort gul distans

- Stäng Tuohy-tillbehörsporten.
- Lyft och ta bort den gula distansen.

Anslut kanylen, avfallsslangen och påsen

Anslut

Anslut

Anslut

- Anslut kanylen till handtaget.
- Anslut avloppsslangen till handtaget.
- Anslut avfallspåsen till slangen.

Förbered handtagsenheten


- Placera trattänden av kanylen i en skål med steril koksaltlösning.
- Aktivera avtryckaren helt tre gånger i inställningen 30 cc för att förbereda systemet.
- Koppla bort och töm avfallspåsen på priminglösning och luft. Anslut sedan avfallspåsen igen.

Kontrollera före överlämning →

- AlphaVac-handtagsenheten är redo för läkare vid följande:
- KONTROLLERA OCH SÄKERSTÄLL**
- Tuohy-tillbehörsporten är stängd.
 - Den gula distansen är borttagen.
 - Handtagsenheten är förberedd.
 - Kanylen, slangen för avfallspåsen och avfallspåsen är anslutna till handtaget.
- Handtaget är redo för läkaren**



Vik ut helt och hållet och inspektera båda sidorna

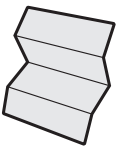

FÖRBEREDELSE 4
SÄTT IN KANYLEN OCH PRIMA SYSTEMET

Läkare/praktiserande läkare

ÖPPNA
För in Kanyl

Sätt in upp till den mörkgrå delen och tills den silvriga delen inte längre är synlig

För in kanylen i hylsan

- Kontrollera eller öppna ventilspaken.
- Förvara hylsan i ett område fritt från tromboembolier för extraktion.
- För in kanylen i hylsan upp till den mörkgrå delen och tills den silvriga delen inte längre är synlig.
- Dra i handtagsavtryckaren en gång vid 10 cc-inställningen för att evakuera eventuell luft som kommer in under kanylinförandet.

Dra INTE ut tratten ur hylsan förrän primningen är klar.

FÖRSIKTIGHET: Om tratten dras ut ur hylsan innan den primas kan luft komma in och utgöra en fara för patienten. Håll tratten innanför hylsan tills primningen är klar.

SÄKRA

Säkra kanylen

- Vrid ventilspaken till säkert läge för att säkra kanylen.

Aspirera och spola

Öppen

Stängd

Aspirera och spola hylsans avstängningskran

- Aspirera luft från avstängningskranen, spola sedan och stäng avstängningskranen.

Öppna Tuohy-tillbehörsporten för att tillåta backflöde

Stäng porten när backflöde uppstår

Öppna/stäng Tuohy-tillbehörsporten för backflöde

- Öppna Tuohy-tillbehörsporten.
- Tillåt backflöde via porten.
- Stäng porten.

AlphaVac-systemet är primat och redo att användas när:

KONTROLLERA OCH SÄKERSTÄLL

- Kanylen förs in i hylsan upp till den mörkgrå delen.
- Ventilspaken är säkrad.
- Avstängningskranen har aspirerats, spolats och stängts.
- Backflöde via Tuohy-tillbehörsporten utfördes.
- Tuohy-tillbehörsporten är stängd.

AlphaVac-systemet är redo att användas



ANVÄNDNING 5
AVLÄGSNANDE AV TROMBOEMBOLIER

Läkare/praktiserande läkare

ÖPPNA

Flytta fram kanyltratten

SÄKRA

Flytta fram trätt

- Öppna ventilspaken.
- Flytta fram kanyltratten.
- Vrid ventilspaken till säkert läge för att säkra kanylen.

Navigera till och fånga upp tromboembolier

- Navigera till tromboembolier.
- Dra manuellt i avtryckarhandtaget vid behov, med en kontrollerad rörelse, för att gradvis fånga upp tromboembolier.

När tromboemboli har fångats upp

- Fortsätt att pumpa manuellt med endera inställningen på 10 cc (ml) eller 30 cc (ml).
- eller använd vakuumlås (se nästa bild).

Användning av vakuumlås (använd endast när kanylen är tilltäppt)

- Tromboembolier måste fångas upp.
- Använd inställningen 30 cc (ml) och aktivera vakuumlåset.
- Fortsätt att övervaka proceduren.

- FÖRSIKTIGHET:** Om Tuohy-tillbehörsporten öppnas under vakuum kan luft komma in i systemet och utgöra en fara för patienten. Var försiktig när du öppnar Tuohy-tillbehörsporten för att undvika att luft kommer in i systemet.

ANVÄNDNING 6
AVLÄGSNA SYSTEMET FRÅN PATIENTEN

Läkare/praktiserande läkare

ÖPPNA

Dra tillbaka kanylens trätt

SÄKRA

Dra tillbaka tratten

- Öppna ventilspaken.
- Dra tillbaka kanylen så att tratten är helt indragen i hylsan.
- Vrid ventilspaken till säkert läge för att säkra kanylen.

Ta bort systemet

FÖRSIKTIGHET: Vid borttagning, UNDVIK att koppla bort handtaget från kanylen. Om det finns tromboembolier i kanylen kan det leda till återflöde av blod genom kanylen och återintroduktion av tromboembolierna.

ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

SNABBGUIDE

ifu.angiodynamics.com

19903659-02 Rev A 03/2025

AngioDynamics, och AngioDynamics logotyp, AlphaVac, och AlphaVac logotyp är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör AngioDynamics, Inc, en filial eller ett dotterbolag.

© 2025 AngioDynamics, Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP
AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

SNABBGUIDE

- FÖRBEREDELSE
OBTURATOR OCH HYLSA
- FÖRBEREDELSE
PLACERA HYLSEN I PATIENT
- FÖRBEREDELSE
HANDTAG
- FÖRBEREDELSE
SÄTT IN KANYLEN OCH PRIMA SYSTEMET
- ANVÄNDNING
AVLÄGSNANDE AV TROMBOEMBOLIER
- ANVÄNDNING
AVLÄGSNA SYSTEMET FRÅN PATIENTEN

VIKTIGT: Se bruksanvisningen som medföljer produkten för fullständiga indikationer, instruktioner, varningar, försiktighetsåtgärder, möjliga biverkningar och kontraindikationer före användning av produkten.