


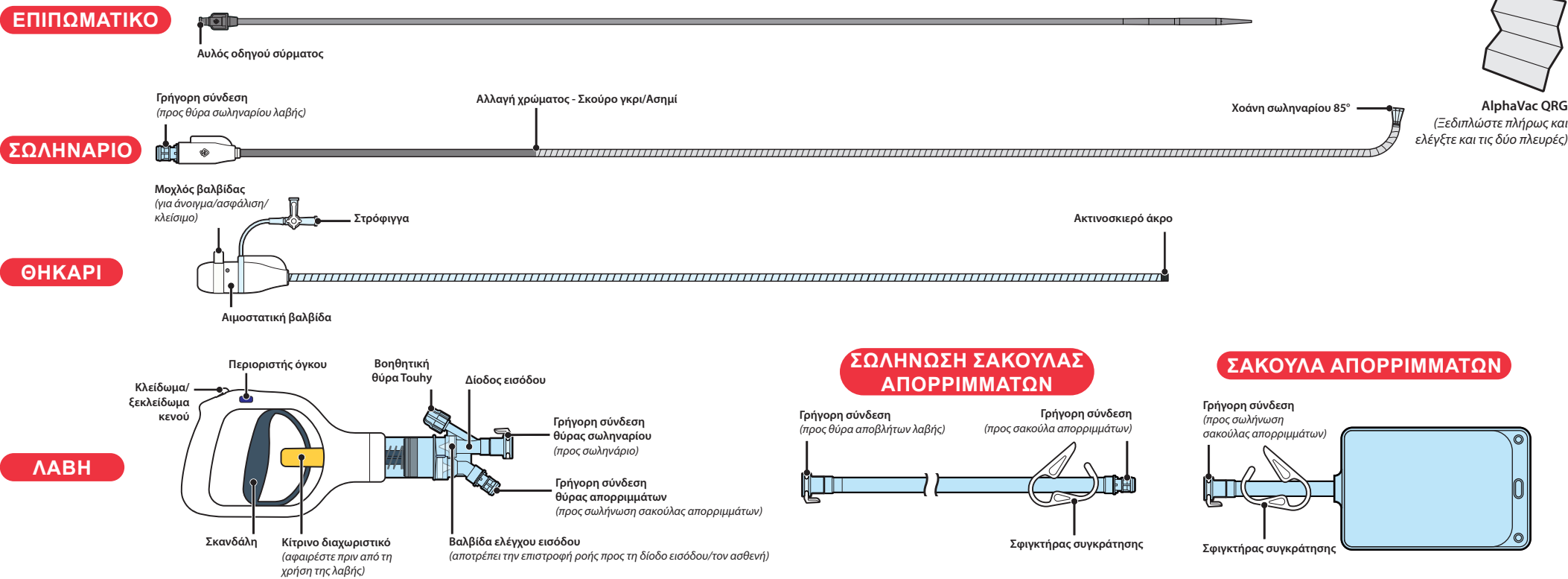

Ρύθμιση/Προετοιμασία

Εισαγάγετε

Εισαγάγετε το επιπωματικό στο θηκάρι

- Εισαγάγετε πλήρως το επιπωματικό στο θηκάρι.

SECURE (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ)

Ασφαλίστε τον μοχλό βαλβίδας

- Περιστρέψτε τον μοχλό βαλβίδας στη θέση Secure (Ασφαλισμένο) για να ασφαλίσετε το επιπωματικό.

Εκπλύνετε

Εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος και τη στρόφιγγα

- Εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος.
- Εκπλύνετε και κλείστε τη στρόφιγγα στο θηκάρι.

- Η διάταξη θηκαριού και επιπωματικού είναι έτοιμη για τοποθέτηση στον ασθενή όταν:
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ**
- Το επιπωματικό έχει εισαχθεί στο θηκάρι.
 - Ο μοχλός βαλβίδας είναι ασφαλισμένος.
 - Έχει πραγματοποιηθεί έκπλυση στον αυλό οδηγού σύρματος και στη στρόφιγγα.
 - Η στρόφιγγα είναι κλειστή.

Έτοιμη για τοποθέτηση από τον ιατρό στον ασθενή



Ελέγξτε πριν από την παράδοση →

Ιατρός/Επαγγελματίας

θρομβοεμβολή

θηκάρι

Παρουσιάστε και τοποθετήστε το θηκάρι στον ασθενή

- Παρουσιάστε το θηκάρι/επιπωματικό.
- Τοποθετήστε το άκρο του θηκαριού σε μια περιοχή χωρίς θρομβοεμβολή για εξαγωγή (αυτή η θέση επιτρέπει την επέκταση της χοάνης πριν από την αναρρόφηση).

OPEN (ΑΝΟΙΧΤΟ)

Ανοίξτε τον μοχλό βαλβίδας

- Ανοίξτε τον μοχλό βαλβίδας.

Αφαιρέστε

Αφαιρέστε το επιπωματικό και τον οδηγό-σύρμα ή μόνο το επιπωματικό

- Ενώ διατηρείτε το θηκάρι στη θέση του, αφαιρέστε το επιπωματικό και τον οδηγό-σύρμα ή μόνο το επιπωματικό. Το θηκάρι θα πρέπει να παραμείνει στον ασθενή.
- Αν ο οδηγός-σύρμα παραμείνει στον ασθενή, περιστρέψτε τον μοχλό βαλβίδας στη θέση Closed (Κλειστό). Εάν ο οδηγός-σύρμα αφαιρεθεί με το επιπωματικό, η αιμοστατική βαλβίδα διατηρεί αιμόσταση.

- Το θηκάρι είναι έτοιμο να υποδεχθεί το σωληνάριο και τη λαβή όταν:
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ**
- Το θηκάρι βρίσκεται σε θέση μακριά από θρομβοεμβολή.
 - Το επιπωματικό και ο οδηγός-σύρμα ή μόνο το επιπωματικό αφαιρούνται από το θηκάρι.
- Το θηκάρι είναι έτοιμο να υποδεχθεί το σωληνάριο και τη λαβή



Ρύθμιση/Προετοιμασία

Περιστρέψτε για να κλείσετε τη βοηθητική θύρα τουhy

Ανασηκώστε και αφαιρέστε το κίτρινο διαχωριστικό

Κλείστε τη θύρα Τουhy και αφαιρέστε το κίτρινο διαχωριστικό

- Κλείστε τη βοηθητική θύρα τουhy.
- Ανασηκώστε και αφαιρέστε το κίτρινο διαχωριστικό.

Συνδέστε

Συνδέστε το σωληνάριο, τη σωλήνωση απορριμμάτων και τη σακούλα απορριμμάτων

- Συνδέστε το σωληνάριο στη λαβή.
- Συνδέστε τη σωλήνωση απορριμμάτων στη λαβή.
- Συνδέστε τη σακούλα απορριμμάτων στη σωλήνωση.

Πλήρωση της διάταξης λαβής

- Τοποθετήστε το άκρο χοάνης του σωληναρίου σε ένα δοχείο με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό.
- Ενεργοποιήστε πλήρως τη σκανδάλη λαβής τρεις φορές στη ρύθμιση 30 cc για πλήρωση του συστήματος.
- Αποσυνδέστε και αδειάστε τη σακούλα απορριμμάτων του διαλύματος πλήρωσης και αέρα και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τη σακούλα απορριμμάτων.


- Η διάταξη λαβής AlphaVac είναι έτοιμη για τον ιατρό όταν:
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ**
- Η βοηθητική θύρα τουhy είναι κλειστή.
 - Το κίτρινο διαχωριστικό έχει αφαιρεθεί.
 - Η πλήρωση της διάταξης λαβής έχει ολοκληρωθεί.
 - Το σωληνάριο, η σωλήνωση σακούλας απορριμμάτων και η σακούλα απορριμμάτων έχουν συνδεθεί στη λαβή.

Η διάταξη λαβής είναι έτοιμη για τον ιατρό



Ελέγξτε πριν από την παράδοση →

Ξεδιπλώστε πλήρως και ελέγξτε και τις δύο πλευρές

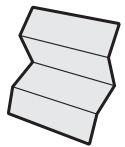

Ιατρός/Επαγγελματίας

Εισαγάγετε το σωληνάριο

Εισαγάγετε το σωληνάριο στο θηκάρι

- Ελέγξτε ή ανοίξτε τον μοχλό βαλβίδας.
- Διατηρήστε το θηκάρι σε περιοχή χωρίς θρομβοεμβολή για εξαγωγή.
- Εισαγάγετε το σωληνάριο έως το σκούρο γκρι τμήματα και έως όπου το ασημί τμήμα δεν είναι πλέον ορατό.
- Τραβήξτε τη σκανδάλη λαβής μία φορά στη ρύθμιση 10 cc για να εκκενώσετε τυχόν αέρα που έχει εισαχθεί κατά την εισαγωγή του σωληναρίου.

ΜΗΝ επεκτείνετε τη χοάνη εκτός του θηκαρίου έως όπου ολοκληρωθεί η πλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επέκταση της χοάνης εκτός του θηκαρίου πριν από την πλήρωση μπορεί να προκαλέσει εισαγωγή αέρα και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή. Διατηρείτε τη χοάνη στο εσωτερικό του θηκαρίου έως όπου ολοκληρωθεί η πλήρωση.

Ασφαλίστε το σωληνάριο

- Περιστρέψτε τον μοχλό βαλβίδας στη θέση Secure (Ασφαλισμένο) για να ασφαλίσετε το σωληνάριο.

Πραγματοποιήστε αναρρόφηση και έκπλυση της στρόφιγγας θηκαρίου

- Πραγματοποιήστε αναρρόφηση του αέρα από τη στρόφιγγα και, στη συνέχεια, έκπλυση και κλείσιμο της στρόφιγγας.

Ανοίξτε τη βοηθητική θύρα του για να είναι δυνατή η εκκένωση

Κλείστε την θύρα όταν παρουσιαστεί εκκένωση

Ανοίξτε/κλείστε τη θύρα του για εκκένωση

- Ανοίξτε τη βοηθητική θύρα του.
- Επιτρέψτε την εκκένωση μέσω της θύρας.
- Κλείστε τη θύρα.

- Η πλήρωση του συστήματος AlphaVac έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία όταν:
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ**
- Το σωληνάριο έχει εισαχθεί στο θηκάρι έως το σκούρο γκρι τμήμα.
 - Ο μοχλός βαλβίδας είναι ασφαλισμένος.
 - Έχει πραγματοποιηθεί αναρρόφηση, έκπλυση και κλείσιμο της στρόφιγγας.
 - Πραγματοποιήστε εκκένωση μέσω της βοηθητικής θύρας του
 - Η βοηθητική θύρα του έχει κλείσει.
- Το σύστημα AlphaVac είναι έτοιμο για λειτουργία**



Ιατρός/Επαγγελματίας

Πρωθήστε τη χοάνη

- Ανοίξτε τον μοχλό βαλβίδας.
- Πρωθήστε τη χοάνη σωληναρίου.
- Περιστρέψτε τον μοχλό βαλβίδας στη θέση Secure (Ασφαλισμένο) για να ασφαλίσετε το σωληνάριο.

Πλοηγηθείτε στη θρομβοεμβολή και εμπλέξτε το εργαλείο σε αυτήν

- Πλοηγηθείτε στη θρομβοεμβολή.
- Τραβήξτε χειροκίνητα τη σκανδάλη λαβής όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενη κίνηση, για σταδιακή εμπλοκή στη θρομβοεμβολή.

Όταν πραγματοποιηθεί εμπλοκή στη θρομβοεμβολή

- Συνεχίστε να αντλείτε χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση στα 10 cc (mL) ή στα 30 cc (mL).
- ή χρησιμοποιήστε το κλειδί κενού (βλ. επόμενη εικόνα).

Χρήση κλειδώματος κενού (Μόνο όταν το σωληνάριο παρουσιάζει απόφραξη)

- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εμπλοκή στη θρομβοεμβολή.
- Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 30 cc (mL) και ενεργοποιήστε το κλειδί κενού.
- Συνεχίστε να παρακολουθείτε τη διαδικασία.

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το άνοιγμα της βοηθητικής θύρας του κατά τη διάρκεια κενού μπορεί να προκαλέσει εισαγωγή αέρα στο σύστημα και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή. Προσέχετε κατά το άνοιγμα της βοηθητικής θύρας του για να αποφύγετε την εισαγωγή αέρα στο σύστημα.

Ιατρός/Επαγγελματίας

Αποσύρετε τη χοάνη

- Ανοίξτε τον μοχλό βαλβίδας.
- Τραβήξτε το σωληνάριο προς τα πίσω, έτσι ώστε η χοάνη να αποσυρθεί πλήρως στο εσωτερικό του θηκαρίου.
- Περιστρέψτε τον μοχλό βαλβίδας στη θέση Secure (Ασφαλισμένο) για να ασφαλίσετε το σωληνάριο.

Αφαιρέστε το σύστημα

- Διατηρείτε τη λαβή συνδεδεμένη στο σωληνάριο κατά την αφαίρεση του συστήματος από τον ασθενή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αφαίρεση, **ΜΗΝ** αποσυνδέετε τη λαβή από το σωληνάριο. Σε περίπτωση θρομβοεμβολής στο σωληνάριο, υπάρχει κίνδυνος επιστροφής ροής του αίματος μέσα από το σωληνάριο και επανεισαγωγής της θρομβοεμβολής.

ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ifu.angiodynamics.com

19903659-04 Rev A 03/2025

Η επωνυμία AngioDynamics και το λογότυπο AngioDynamics, η επωνυμία AlphaVac και το λογότυπο AlphaVac είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της AngioDynamics, Inc., συνεργαζόμενης ή θυγατρικής εταιρείας.

© 2025 AngioDynamics, Inc. ή συνδεδεμένες εταιρείες. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797