



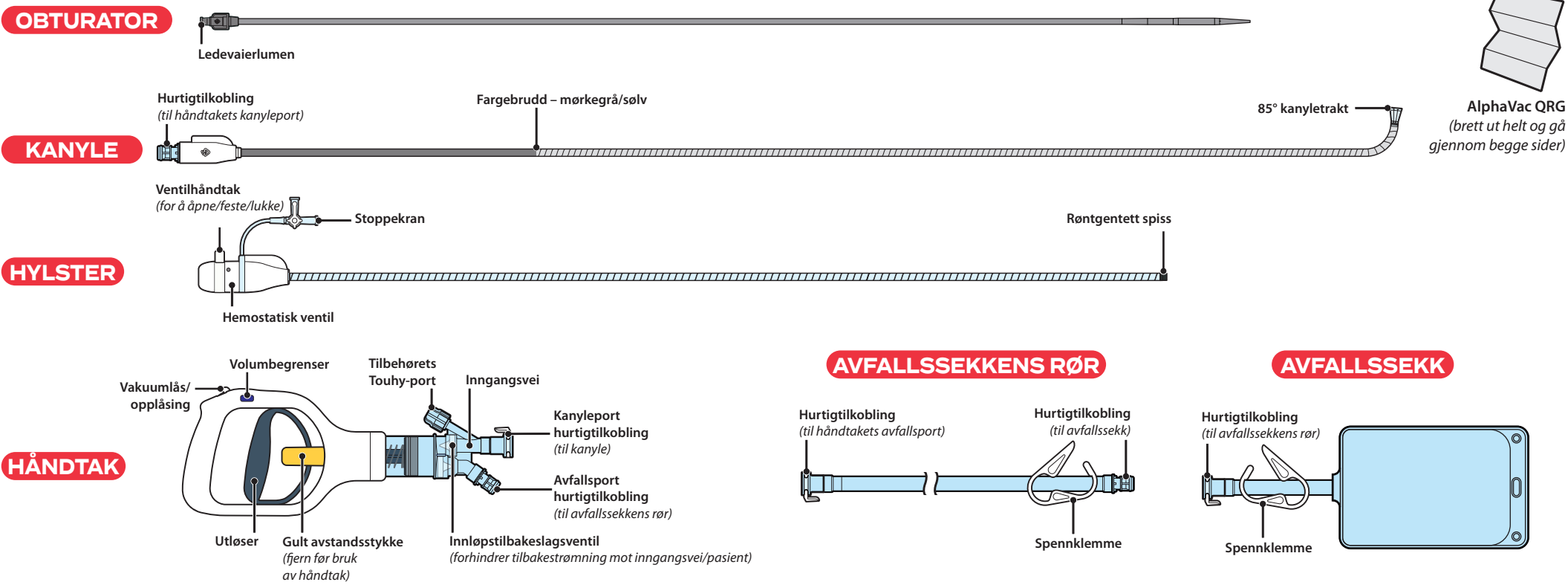


Oppsett/forbereder

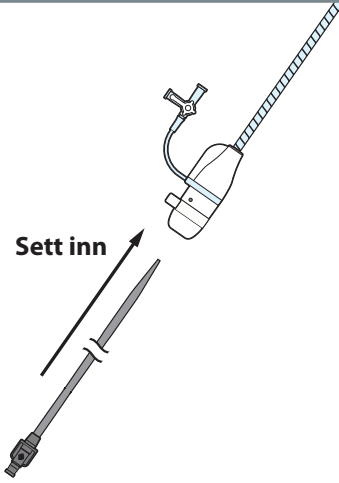


Sett inn obturator i hylster

- Sett obturatoren helt inn i hylsteret.

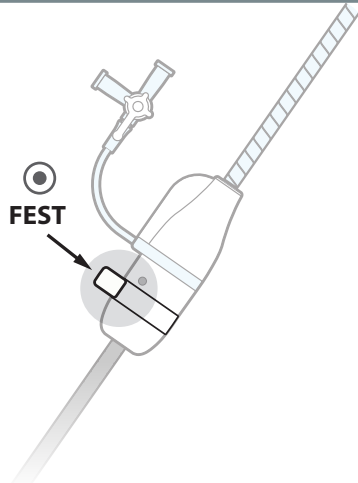

Fest ventilhåndtak

- Roter ventilhåndtaket til sikker posisjon for å sikre obturatoren.

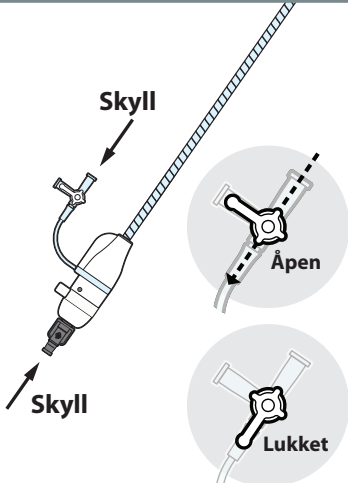

Skyll ledevaierlumen og stoppekran

- Skyll ledevaierlumen.
- Skyll og lukk stoppekranen på hylsteret.

Hylster- og obturatorenhet er klar for å settes i pasient når:

KONTROLLER OG SØRG FOR AT


- Obturator er satt inn i hylsteret.
- Ventilhåndtak er sikret.
- Både ledevaierlumen og stoppekranen er skylt.
- Stoppekranen er lukket.

Klar for å sette inn i pasient av lege




Sjekk før overlevering →

Lege/allmennlege

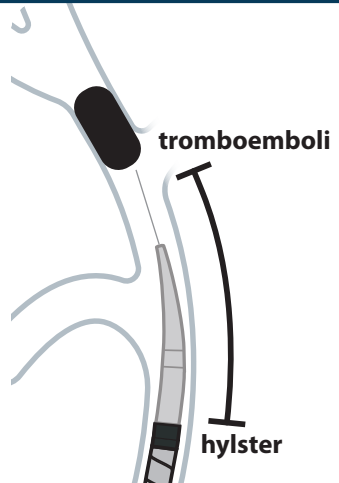


Introduser og sett hylster i pasient

- Introduser hylsteret/obturatoren.
- Plasser spissen av hylsteret i et område som er fritt for tromboemboli for ekstrahering (denne posisjonen muliggjør traktutvidelse før aspirasjon).

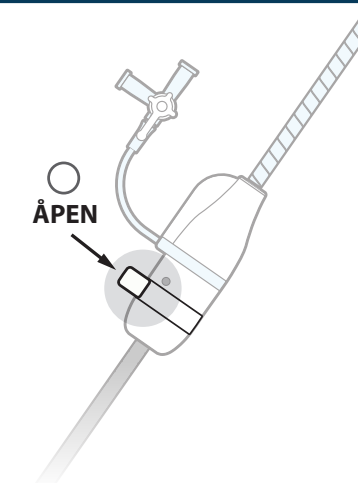

Åpne ventilhåndtak

- Åpne ventilhåndtaket.

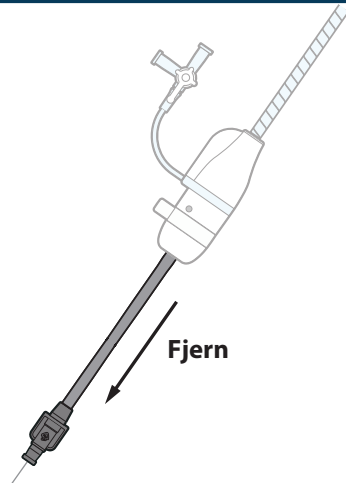

Fjern både obturator og ledevaier, eller bare obturator.

- Mens hylsteret holdes i posisjon, fjern obturatoren og ledevaieren, eller bare obturatoren. Hylster bør forbli i pasient.
- Hvis ledevaieren forblir i pasienten, roter ventilhåndtaket til lukket posisjon. Hvis ledevaieren fjernes med obturatoren, vil den hemostatiske ventilen opprettholde blodstasis.

Hylster er klar for å motta kanyle og håndtak når:


KONTROLLER OG SØRG FOR AT

- Hylster er plassert borte fra tromboemboli.
- Både obturator og ledevaier, eller bare obturator, er fjernet fra hylsteret.

Hylster er klar for å motta kanyle og håndtak




Oppsett/forbereder

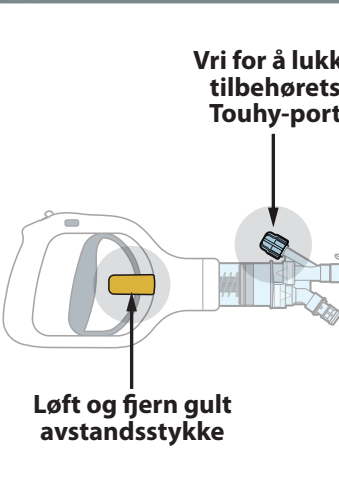

Lukk Touhy og fjern gult avstandsstykke

- Lukk tilbehørs Touhy-port.
- Løft og fjern gult avstandsstykke.

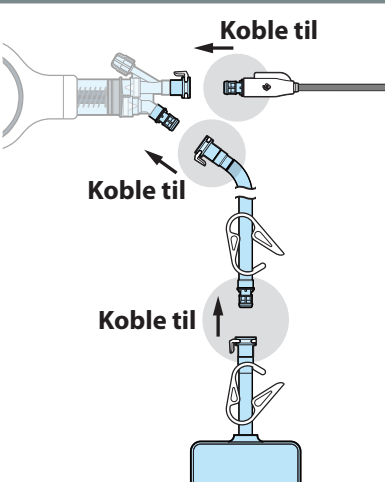

Koble til kanyle, avfallsrør og pose

- Koble kanyle til håndtak.
- Koble avfallssekkens rør til håndtak.
- Koble til avfallssekken til rør.

Klargjør håndtaksenhet

- Plasser traktenden av kanylen i en bolle med steril saltløsning.
- Aktuer håndtakutløseren helt tre ganger i 30 cc-innstillingen (ml) for å klargjøre systemet.
- Koble fra og tøm avfallssekken for klargjøringsvæske og luft, og koble så til avfallssekken igjen.

AlphaVac-håndtaksenhet er klar for lege når:

KONTROLLER OG SØRG FOR AT

- Tilbehørs Touhy-port er lukket.
- Gult avstandsstykke er fjernet.
- Håndtaksenheten er klargjort.
- Kanyle, avfallssekkens rør og avfallssekken er koblet til håndtak.

Håndtaksenhet er klar for lege



Sjekk før overlevering →



Lege/allmennlege

ÅPEN

Sett inn Kanyle

Sett inn opp til den mørkegrå delen og sølvdelen er ikke lenger synlig

IKKE utvid trakten ut av hylsteret før priming er fullført.

FORSIKTIG: Utvidelse av trakten ut av hylsteret før priming kan introdusere luft og sette pasienten i fare. Hold trakten inni hylsteret til priming er fullført.

Sett inn kanyle i hylster

- Kontroller eller åpne ventilhåndtaket.
- Hold hylsteret i et område som er fritt for tromboemboli for ekstrahering.
- Sett inn kanyle i hylster opp til den mørkegrå delen og til sølvdelen ikke lenger er synlig.
- Trekk i håndtaksutløseren til 10 cc (ml) for å tømme eventuell luft som ble innført under innsetting av kanylen.

FEST

Fest kanyle

- Roter ventilhåndtaket til sikker posisjon for å sikre posisjonen til kanylen.

Aspirer og skyl

Åpen

Lukket

Aspirer og skyl hylsterets stoppekran

- Aspirer luft fra stoppekransen, og skyl og lukk deretter stoppekransen.

Åpne tilbehørets Touhy-port for å tillate tilbakelufting

Lukk porten når tilbakelufting inntreffer

Åpne/lukk Touhy-port for tilbakelufting

- Åpne tilbehørets Touhy-port.
- Tillat tilbakelufting via port.
- Lukk porten.

AlphaVac-system er primet og klart for drift når:

KONTROLLER OG SØRG FOR AT

- Kanyle er satt inn i hylsteret opp til den mørkegrå delen.
- Ventilhåndtak er sikret.
- Stoppekransen har blitt aspirert, skylt og lukket.
- Tilbakelufting via tilbehørets Touhy-port ble utført.
- Tilbehørets Touhy-port er lukket.

AlphaVac-system er klart for drift



Lege/allmennlege

ÅPEN

Før frem kanyletrakt

FEST

Før frem trakt

- Åpne ventilhåndtaket.
- Før frem kanyletrakt.
- Roter ventilhåndtaket til sikker posisjon for å sikre posisjonen til kanylen.

Naviger til og koble inn tromboemboli

- Naviger til tromboemboli.
- Trekk håndtaksutløseren manuelt etter behov, med en kontrollert bevegelse, for å gradvis koble inn tromboemboli.

Når tromboemboli er koblet inn

- Fortsett å pumpe manuelt med innstilling på 10 cc (ml) eller 30 cc (ml).
- eller bruk vakuumlås (se neste bilde).

Trekk utløser tilbake

Koble inn vakuumlås

Bruke vakuumlås
(skal kun brukes når kanyle er okkludert)

- Tromboemboli må være koblet inn.
- Bruk 30 cc-innstillingen (ml) og koble inn vakuumlås.
- Fortsett for å overvåke prosedyre.

- FORSIKTIG:** Åpning av tilbehørets Touhy-port under vakuum kan introdusere luft i systemet og sette pasienten i fare. Vær forsiktig ved åpning av tilbehørets Touhy-port for å unngå å introdusere luft i systemet.

Lege/allmennlege

ÅPEN

Trekk tilbake kanyletrakt

FEST

Trekk tilbake trakt

- Åpne ventilhåndtaket.
- Trekk kanyle tilbake slik at trakten er helt trukket tilbake inni hylsteret.
- Roter ventilhåndtaket til sikker posisjon for å sikre posisjonen til kanylen.

Fjern system

- Hold håndtaket festet til kanylen ved fjerning av system fra pasient.

FORSIKTIG: Ved fjerning IKKE koble håndtak fra kanyle. Hvis det er tromboemboli i kanylen, kan det føre til tilbakestrømning av blod gjennom kanylen og reintroduksjon av tromboembolien.

ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

HURTIG REFERANSEVEILEDNING

ifu.angiodynamics.com

19903659-09 Rev A 03/2025

AngioDynamics og AngioDynamics-logoen, AlphaVac og AlphaVac-logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker for AngioDynamics, Inc., et tilknyttet selskap eller et datterselskap.

© 2025 AngioDynamics, Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP
AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18⁸⁵

HURTIGREFERANSEVEILEDNING

- KLARGJØRE
OBTURATOR- OG HYLSTERENHET
- KLARGJØRE
SETTE HYLSTER I PASIENT
- KLARGJØRE
KLARGJØRE HÅNDTAKSENHET
- KLARGJØRE
SETT INN KANYLE OG PRIMINGSYSTEM
- DRIFT
FJERNE TROMBOEMBOLI
- DRIFT
FJERNE SYSTEM FRA PASIENT

VIKTIG: Se bruksanvisningen som fulgte med produktet for fullstendige indikasjoner, instruksjoner, advarsler, forholdsregler, mulige bivirkninger og kontraindikasjoner før bruk av produktet.