


OBTÜRATÖR




KANÜL

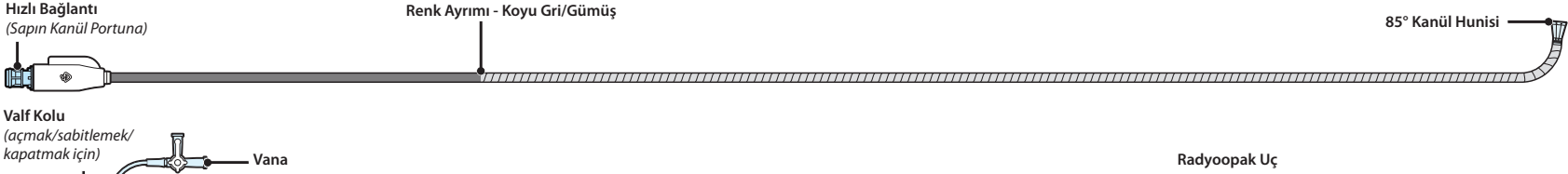


KILIF





SAP

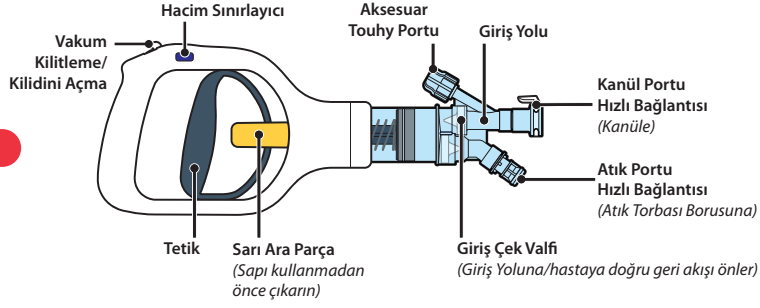

ATIK TORBASİ BORUSU

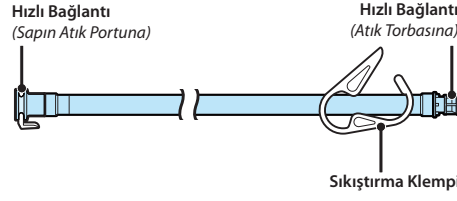


ATIK TORBASİ

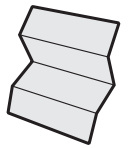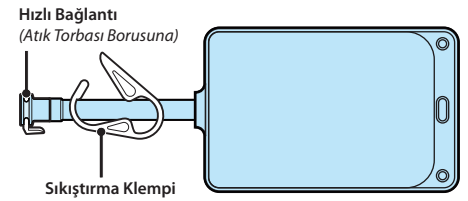


AlphaVac QRG
(Tamamen açın ve her iki tarafı da inceleyin)

Kullanıma Hazırlık/Hazırlayıcı

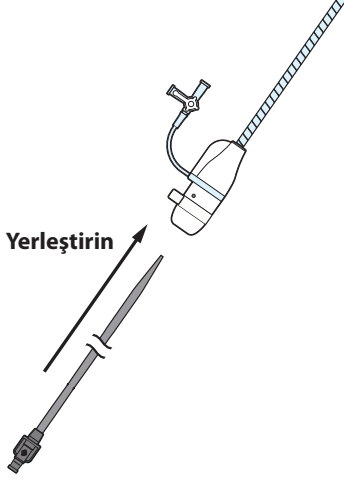


Obtüratörü Kılıfa Yerleştirin

- Obtüratörü kılıfa tamamen sokun.

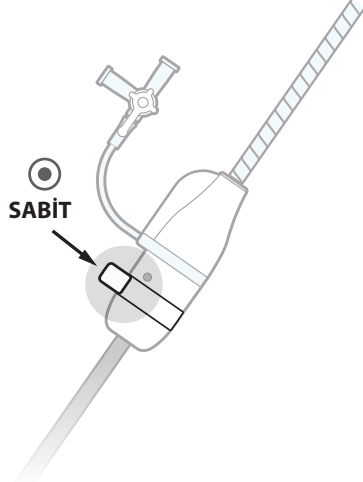

Valf Kolunu Sabitleyin

- Obtüratörü sabitlemek için valf kolunu Sabit konumuna döndürün.

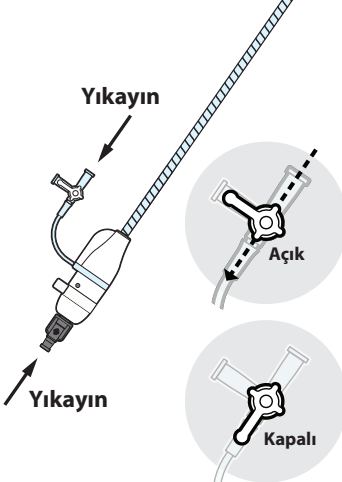

Kılavuz Tel Lümenini ve Vanayı Yıkayın

- Kılavuz tel lümenini yıkayın.
- Kılıfın üzerindeki vanayı yıkayın ve kapatın.

Kılıf ve obtüratör mekanizması aşağıdakiler sağlandığında hastaya yerleştirilmeye hazırdır:

KONTROL EDİN VE DOĞRULAYIN


- Obtüratör, kılıfa yerleştirilmiştir.
- Valf Kolu sabitlenmiştir.
- Hem kılavuz tel lümeni hem de vana yıkanmıştır.
- Vana kapalıdır.

Hekim tarafından hastaya yerleştirilmeye hazırdır




Vermeden önce kontrol edin →

Hekim/Pratisyen

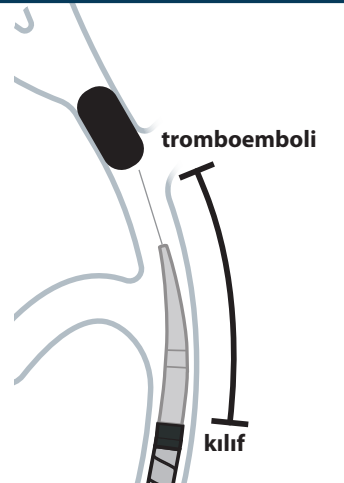


Kılıfı Hastaya Yerleştirme ve Hastada Konumlandırma

- Kılıfı/obtüratörü yerleştirin.
- Ekstraksiyon için kılıfın ucunu tromboemboli olmayan bir alana yerleştirin (bu konum, aspirasyondan önce huninin genişlemesini sağlar).

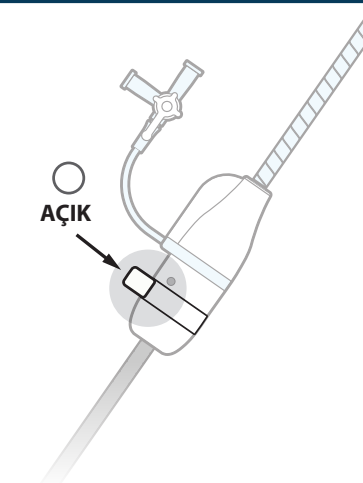

Valf Kolunu Açın

- Valf kolunu açın.

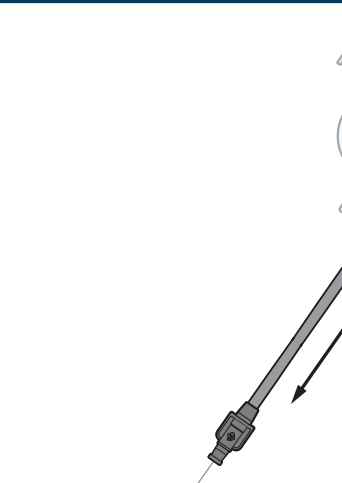

Obtüratörü ve Kılavuz Teli veya sadece Obtüratörü çıkarın

- Kılıfı yerinde tutarken obtüratörü ve kılavuz teli veya sadece obtüratörü çıkarın. Kılıf hastanın içinde kalmalıdır.
- Kılavuz tel hastada kalırsa valf kolunu Kapalı konumuna döndürün. Kılavuz tel obtüratör ile çıkarılırsa hemostatik valf kan stazını koruyacaktır.

Kılıf, aşağıdakiler sağlandığında kanülü ve sapı almaya hazırdır:


KONTROL EDİN VE DOĞRULAYIN

- Kılıf, tromboemboliden uzağa konumlandırılmıştır.
- Obtüratör ve kılavuz tel veya sadece obtüratör kılıftan çıkarılmıştır.

Kılıf, kanülü ve sapı almaya hazırdır




Kullanıma Hazırlık/Hazırlayıcı

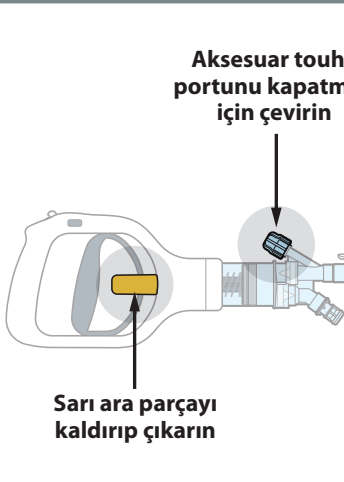

Touhy'yi Kapatın ve Sarı Ara Parçayı Çıkarın

- Aksesuar touhy portunu kapatın.
- Sarı ara parçayı kaldırıp çıkarın.

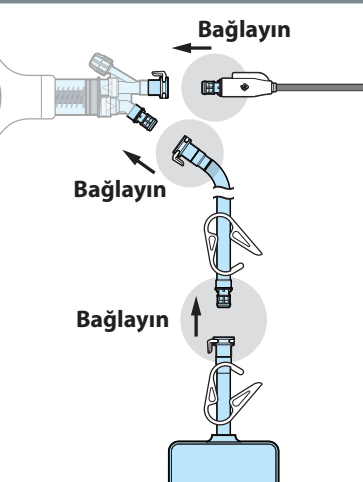

Kanülün, Atık Borusunun ve Torbasının Bağlanması

- Kanülü sapa bağlayın.
- Atık borusunu sapa bağlayın.
- Atık torbasını boruya bağlayın.

Sap Mekanizmasının Kullanıma Hazırlanması

- Kanülün huni ucunu steril salin dolu bir kaba yerleştirin.
- Sistemi hazırlamak için sap tetiğini 30 cc ayarında üç kez tamamen çalıştırın.
- Atık torbasının bağlantısını kesin ve hazırlama solüsyonunu ve havayı boşaltın ve ardından atık torbasını yeniden bağlayın.

AlphaVac sapı, aşağıdakiler sağlandığında hekim için hazırdır:


KONTROL EDİN VE DOĞRULAYIN

- Aksesuar touhy portu kapalıdır.
- Sarı ara parça çıkarılmıştır.
- Sap Mekanizması, kullanıma hazırdır.
- Kanül, atık torbası borusu ve atık torbası sapa takılmıştır.

Sap, hekim için hazırdır




Vermeden önce kontrol edin →

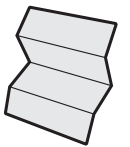

Tamamen açın ve her iki tarafı da inceleyin

Hekim/Pratisyen

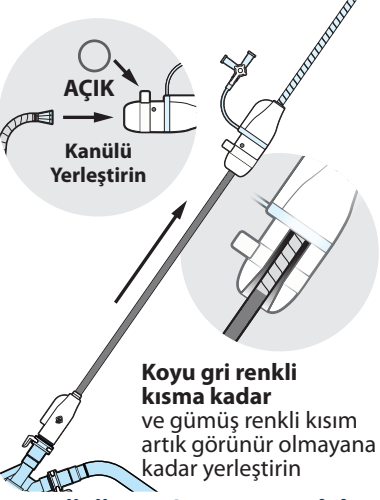


Hazırlama işlemi tamamlanana kadar huniyi kılıfın dışına **ÇIKARMAYIN**.

DİKKAT: Hazırlama işleminden önce huninin kılıftan dışarı çıkarılması hava girmesine neden olabilir ve hastayı tehlikeye atabilir. Hazırlama işlemi tamamlanana kadar huniyi kılıfın içinde tutun.


Kanülü Kılıfa Yerleştirin

- Valf kolunu Açın veya açık olduğunu kontrol edin.
- Ekstraksiyon için kılıfı tromboemboli olmayan bir alanda tutun.
- Koyu gri renkli kısma kadar ve gümüş renkli kısım artık görünür olmayana kadar kanülü kılıfa yerleştirin.
- Kanülün yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan potansiyel havayı boşaltmak etmek için kol tetiğini 10 cc ayarında bir kez çekin.

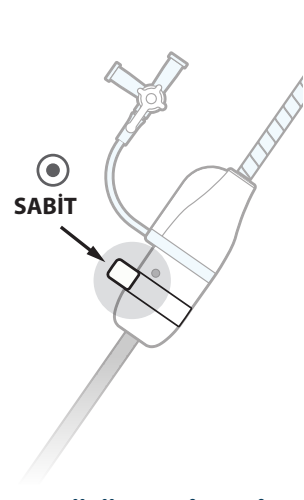

Kanülü Sabitleyin

- Kanülü sabitlemek için valf kolunu Sabit konumuna döndürün.

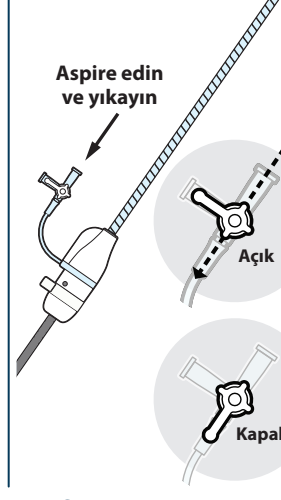

Kılıf Vanasını Aspire Edin ve Yıkayın

- Vanadaki havayı boşaltın, ardından vanayı yıkayın ve kapatın.



Geri Kanama için Touhy Portunu Açın/Kapatın

- Aksesuar touhy portunu açın.
- Port yoluyla geri kanamaya izin verin.
- Portu kapatın.

AlphaVac Sistemi aşağıdakiler sağlandığında çalıştırılmaya hazırdır:


KONTROL EDİN
VE DOĞRULAYIN

- Kanül, koyu gri renkli kısma kadar kılıfın içine yerleştirilmiştir.
- Valf Kolu sabitlenmiştir.
- Vana aspire edilmiş, yıkanmış ve kapatılmıştır.
- Aksesuar touhy portu yoluyla geri kanama gerçekleşmiştir.
- Accessory touhy portu kapalıdır.

AlphaVac sistemi çalıştırmaya hazırdır




Hekim/Pratisyen

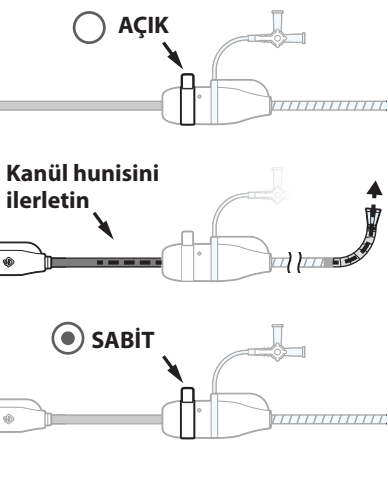


Kanülü İlerletin

- Valf kolunu açın.
- Kanül hunisini ilerletin.
- Kanülü sabitlemek için valf kolunu Sabit konumuna döndürün.

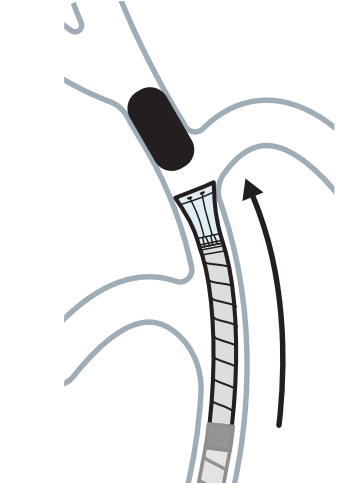

Tromboemboliye Erişin ve Kavrayın

- Tromboemboliye erişin.
- Tromboemboliyi aşamalı olarak kavramak için kontrollü bir hareket kullanarak sap tetiğini manuel olarak gerektiği kadar çekin.

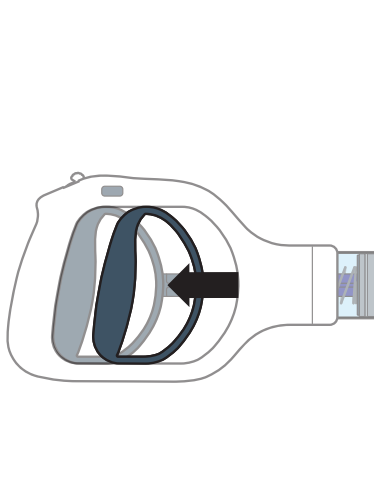

Tromboemboli Kavrandığında

- 10 cc (mL) veya 30 cc (mL) ayarlarından birini kullanarak manuel olarak pompalamaya devam edin.
- veya Vakum Kilidi kullanın (bkz. sonraki görüntü).




Vakum Kilidinin Kullanılması

- (Yalnızca kanül tıkalı olduğunda kullanın)
- Tromboemboli kavranmalıdır.
 - 30 cc (mL) ayarını kullanın ve Vakum Kilidini devreye sokun.
 - Prosedürü izlemeye devam edin.

- DİKKAT:** Vakum sırasında aksesuar touhy portunun açılması sisteme hava girmesine neden olabilir ve hastayı tehlikeye atabilir. Sisteme hava girmesini önlemek için aksesuar touhy portunu açarken dikkatli olun.

Hekim/Pratisyen

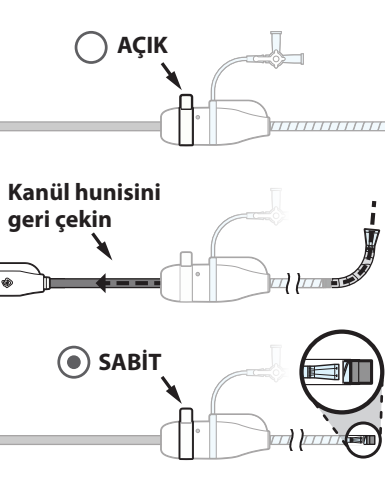

Huniyi Geri Çekin

- Valf kolunu açın.
- Huninin tamamen kılıf içine geri çekilmesi için kanülü geri çekin.
- Kanülü sabitlemek için valf kolunu Sabit konumuna döndürün.



Sistemi Çıkarın

- Sistemi hastadan çıkarırken sapı kanüle takılı halde tutun.

DİKKAT: Çıkarırken, sapın kanüle olan bağlantısını **KESMEYİN**. Kanüle tromboemboli varsa, kanın kanülden geri akmasına ve tromboembolinin geri bırakılmasına neden olabilir.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

**HIZLI
REFERANS
KILAVUZU**

ifu.angiodynamics.com

19903659-12 Rev A 03/2025

AngioDynamics ve AngioDynamics logosu, AlphaVac ve AlphaVac logosu, AngioDynamics, Inc.'in, bağlı veya yan kuruluşlarının ticari ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

© 2025 AngioDynamics, Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP
AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

HIZLI REFERANS KILAVUZU

1 HAZIRLAMA
OBTÜRATÖR VE KILIF MEKANİZMASI

2 HAZIRLAMA
KILIFIN HASTAYA YERLEŞTİRİLMESİ

3 HAZIRLAMA
SAP MEKANİZMASININ HAZIRLANMASI

4 HAZIRLAMA
KANÜLÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE
SİSTEMİN HAZIRLANMASI

5 ÇALIŞTIRMA
TROMBOEMBOLİNİN ÇIKARILMASI

6 ÇALIŞTIRMA
SİSTEMİN HASTADAN ÇIKARILMASI

ÖNEMLİ: Ürünü kullanmadan önce Endikasyonlar, Talimatlar, Uyarılar, Önlemler, Olası Advers Etkiler ve Kontrendikasyonların tamamı için ürünle birlikte verilen Kullanma Yönergelerine bakın.