



OPTURATOR




KANILA

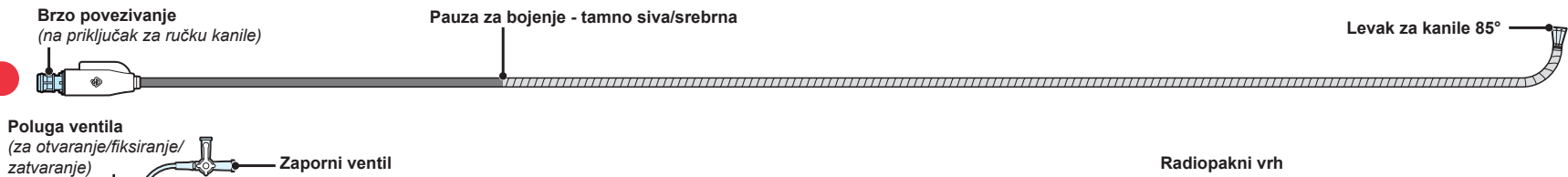


OMOTAČ

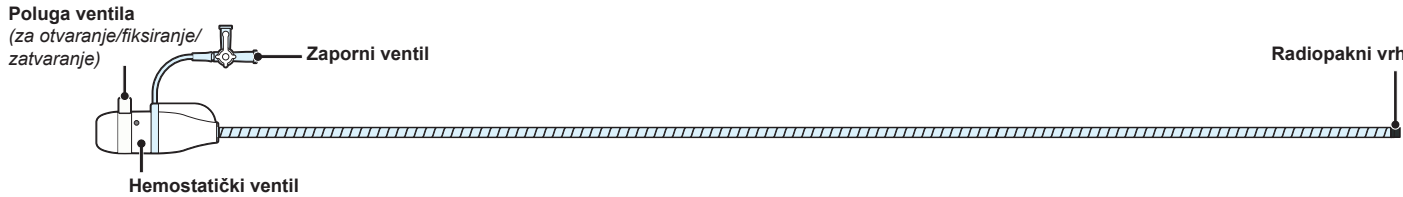


RUČKA

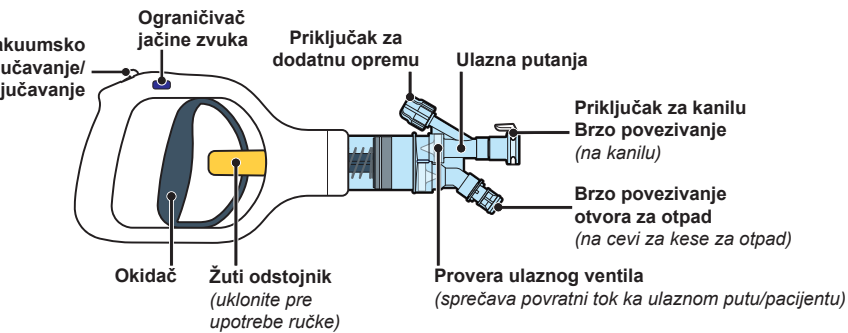

CEVI ZA KESE ZA OTPAD

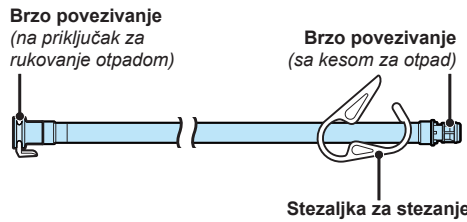


VREĆA ZA OTPAD

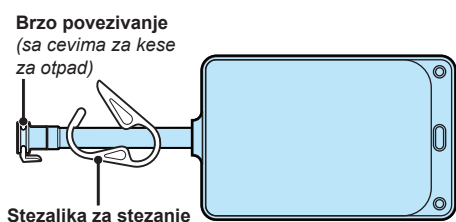


AlphaVac QRG
(potpuno rasklopite
i pregledajte
obe strane)

Podešavanje/priprema

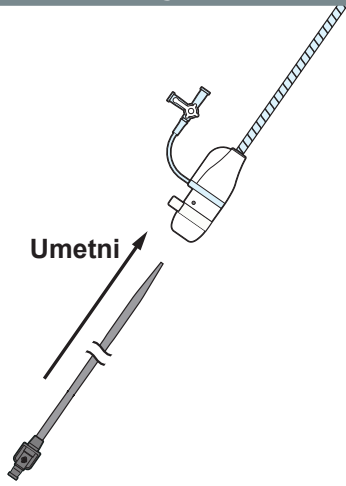


Umetnite opturator u omotač

- Potpuno umetnite opturator u omotač.

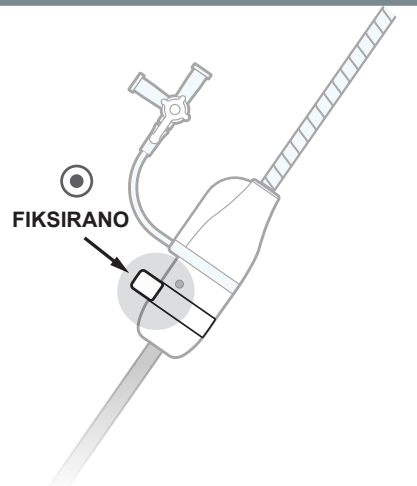

Fiksiranje poluge ventila

- Okrenite polugu ventila u fiksirani položaj da biste fiksirali opturator.

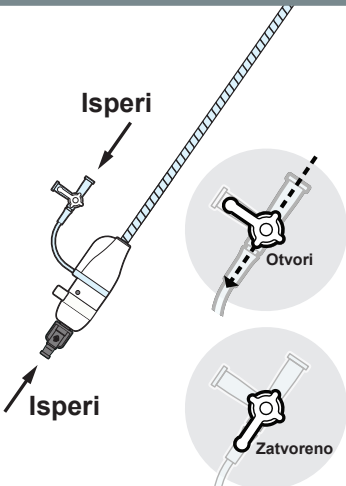

Vodilica za ispiranje Lumen i zaporni ventil

- Isperite lumen vodilice.
- Isperite i zatvorite zaporni ventil na omotaču.

Sklop omotača i opturatora je spreman za postavljanje u pacijenta kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE


- Opturator se ubacuje u omotač.
- Poluga ventila je fiksirana.
- I lumen vodilice i zaporni ventil su isprani.
- Zaporni ventil je zatvoren.

Spremlno za lekara da smesti u pacijenta




Proverite pre primopredaje →

Lekar

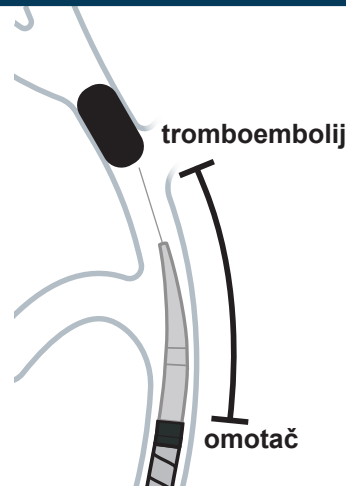


Uvesti i postaviti omotač u pacijenta

- Uvedite omotač/opturator.
- Postavite vrh omotača u područje bez tromboembolija za ekstrakciju (ovaj položaj omogućava širenje levka pre aspiracije).

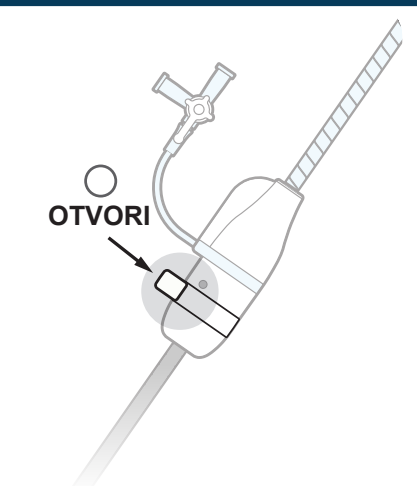

Otvaranje poluge ventila

- Otvorite ručicu ventila.

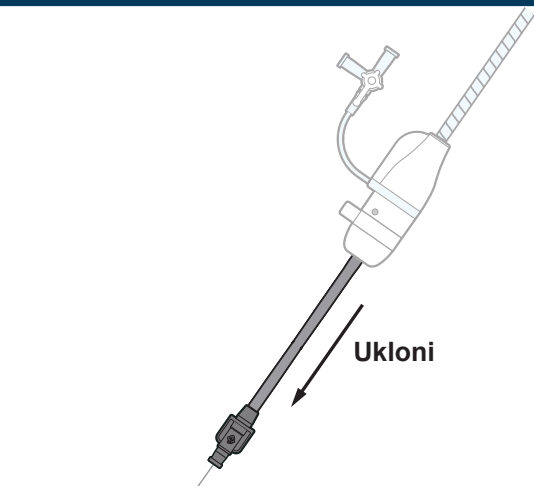

Izvadite i opturator i vodilicu ili samo opturator

- Dok držite omotač u položaju, uklonite i opturator i vodilicu ili samo opturator. Omotač treba da ostane u pacijentu.
- Ako vodilica ostaje u pacijentu, okrenite polugu ventila u zatvoreni položaj. Ako je vodilica izvađena sa opturatorom, hemostatski ventil će održavati zastoj krvi.

Navlaka je spremna za prijem kanile i ručka kada:


PROVERITE I OSIGURAJTE

- Omotač je pozicioniran dalje od tromboembolija.
- I optuator i vodilica ili samo optuator se uklanjaju iz omotača.

Omotač je spreman za prijem kanile i ručke




Podešavanje/priprema

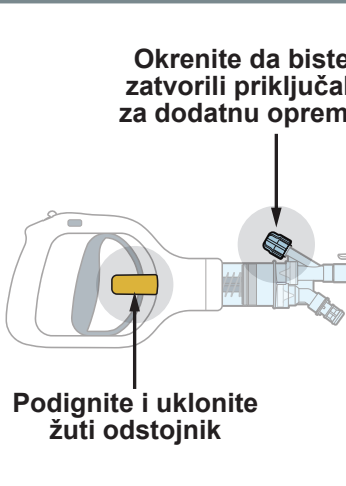

Zatvorite dodirni i uklonite žuti odstojnik

- Zatvorite priključak za dodatnu opremu.
- Podignite i uklonite žuti odstojnik.

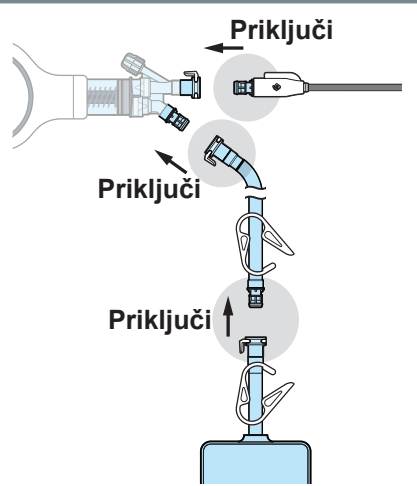

Povežite kanile, cevi za otpad i kesu

- Povežite kanilu sa ručkom.
- Priključite cevi za otpad na rukovanje.
- Priključite kesu za otpad na cevi.

Punjenje sklopa ručke AlphaVac

- Stavite levkasti kraj kanile u posudu sa sterilnim fiziološkim rastvorom.
- Aktivirajte okidač tri puta do kraja u podešavanju od 30 cc kako biste napunili sistem.
- Otkačite i ispraznite rastvor za punjenje i vazduh iz vreće za otpad, a zatim ponovo zakačite vreću za otpad.

Sklop ručke AlphaVac je spreman za lekara kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE


- Priključak za dodatnu opremu je zatvoren.
- Uklonjen je žuti odstojnik.
- Sklop ručke je napunjen.
- Kanila, cevi za kese za otpad i kesa za otpad povezani su sa ručkom.

Sklop ručke je spreman za lekara



Proverite pre primopredaje →

Rasklopite u potpunosti
i pregledajte obe strane

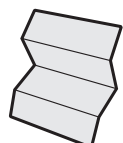

4
PRIPREMA
UVODENJE KANILE I GLAVNOG SISTEMA

Lekar

OTVORI

Umetni Kanila

Umetnite do tamno sivog dela i srebrni deo više nije vidljiv

Umetnite kanilu u omotač

- Proverite ili otvorite ručicu ventila.
- Držite omotač u prostoru bez tromboembolija za ekstrakciju.
- Umetnite kanilu u omotač do tamno sivog dela i dok srebrni deo više ne bude vidljiv.
- Povucite okidač ručice jednom na podešavanju od 10 cc da biste izvukli sav eventualno uvučeni vazduh tokom umetanja kanile.

NEMOJTE izvlačiti levak iz omotača dok se priprema ne završi.

OPREZ: Izvlačenje levka iz omotača pre pripreme može uvesti vazduh i ugroziti pacijenta. Držite levak unutar omotača dok se priprema ne završi.

FIKSIRANO

Fiksiranje kanile

- Okrenite polugu ventila u fiksirani položaj da biste fiksirali kanilu.

Aspirirajte i isperite

Zaporni ventil za aspiraciju i ispiranje omotača

- Usisajte vazduh iz zapornog ventila, zatim isperite i zatvorite zaporni ventil.

Otvorite dodirni priključak za dodatnu opremu kako biste omogućili ispuštanje

Zatvorite otvor kada dođe do ispuštanja

Otvoravanje/ zatvaranje dodirnog otvora za odzračivanje

- Otvorite dodirni priključak za dodatnu opremu.
- Dozvolite da se ispuštanje vrati preko porta.
- Zatvorite port.

AlphaVac sistem je pripremljen i spreman za rad kada:

PROVERITE I OSIGURAJTE

- Kanila se ubacuje u omotač do tamnosivog dela.
- Poluga ventila je fiksirana.
- Zaporni ventil je usisan, ispran i zatvoren.
- Izvršeno je ispuštanje preko priključka za dodirivanje dodatne opreme.
- Priključak za dodatnu opremu je zatvoren.

AlphaVac sistem je spreman za rad



5
RUKOVANJE
UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJA

Lekar

OTVORI

Napredni levak kanile

FIKSIRANO

Napredni levak

- Otvorite ručicu ventila.
- Napredni levak kanile.
- Okrenite polugu ventila u fiksirani položaj da biste fiksirali kanilu.

Idite na i uključite tromboembolije

- Idite do tromboembolija.
- Ručno povucite okidač ručke po potrebi, koristeći kontrolisano kretanje, da biste postepeno aktivirali tromboembolije.

Kada je tromboembolija uključena

- Nastavite da ručno pumpate koristeći podešavanje na 10 cc (ml) ili 30 cc (ml).
- Ili koristite vakuumsko zaključavanje (pogledajte sledeću sliku).

Korišćenje vakuumskog zaključavanja
(koristite samo kada je kanila začepljena)

- Tromboembolija mora biti aktivirana.
- Koristite podešavanje od 30 cc (ml) i uključite vakuumsko zaključavanje.
- Nastavite da pratite proceduru.

- **OPREZ:** Otvoravanje priključka za dodatnu opremu tokom vakuuma može uvesti vazduh u sistem i ugroziti pacijenta. Budite oprezni prilikom otvaranja priključka za dodatnu opremu kako biste izbegli unošenje vazduha u sistem.

6
RUKOVANJE
UKLANJANJE SISTEMA IZ PACIJENTA

Lekar

OTVORI

Levak za uvlačenje kanile

FIKSIRANO

Levak za uvlačenje

- Otvorite ručicu ventila.
- Povucite kanilu unazad tako da se levak potpuno uvuče unutar omotača.
- Okrenite polugu ventila u fiksirani položaj da biste fiksirali kanilu.

Uklonite sistem

- Držite ručku pričvršćenu za kanilu prilikom uklanjanja sistema sa pacijenta.

OPREZ: Prilikom uklanjanja, **NEMOJTE** odvajati ručku od kanile. Ako u kanili ima tromboembolija, to može dovesti do povratnog protoka krvi kroz kanile i ponovnog uvođenja tromboembolija.

angiodynamics

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

KRATKI REFERENTNI VODIČ

ifu.angiodynamics.com

19903659-19 Rev A 03/2025

AngioDynamics, logotip AngioDynamics, AlphaVac i AlphaVac logotip su zaštitni znaci i/ili registrovani zaštitni znaci kompanije AngioDynamics, Inc., filijale ili podružnice.


© 2025. AngioDynamics, Inc. ili filijale ove kompanije. Sva prava zadržana.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

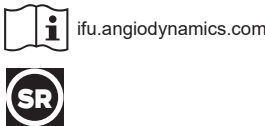

KRATKI REFERENTNI VODIČ

- 1 PRIPREMA**
SKLOP OPTURATORA I OMOTAČA
- 2 PRIPREMA**
POSTAVLJANJE OMOTAČA U PACIJENTA
- 3 PRIPREMA**
UGRADNJA RUČKE ZA PUNJENJE
- 4 PRIPREMA**
UVODENJE KANILE I GLAVNOG SISTEMA
- 5 OPERATIVNO**
UKLANJANJE TROMBOEMBOLIJA
- 6 RUKOVANJE**
UKLANJANJE SISTEMA IZ PACIJENTA

VAŽNO: Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju uz proizvod za kompletne indikacije, uputstva, upozorenja, mere predostrožnosti, moguće neželjene efekte i kontraindikacije pre upotrebe proizvoda.