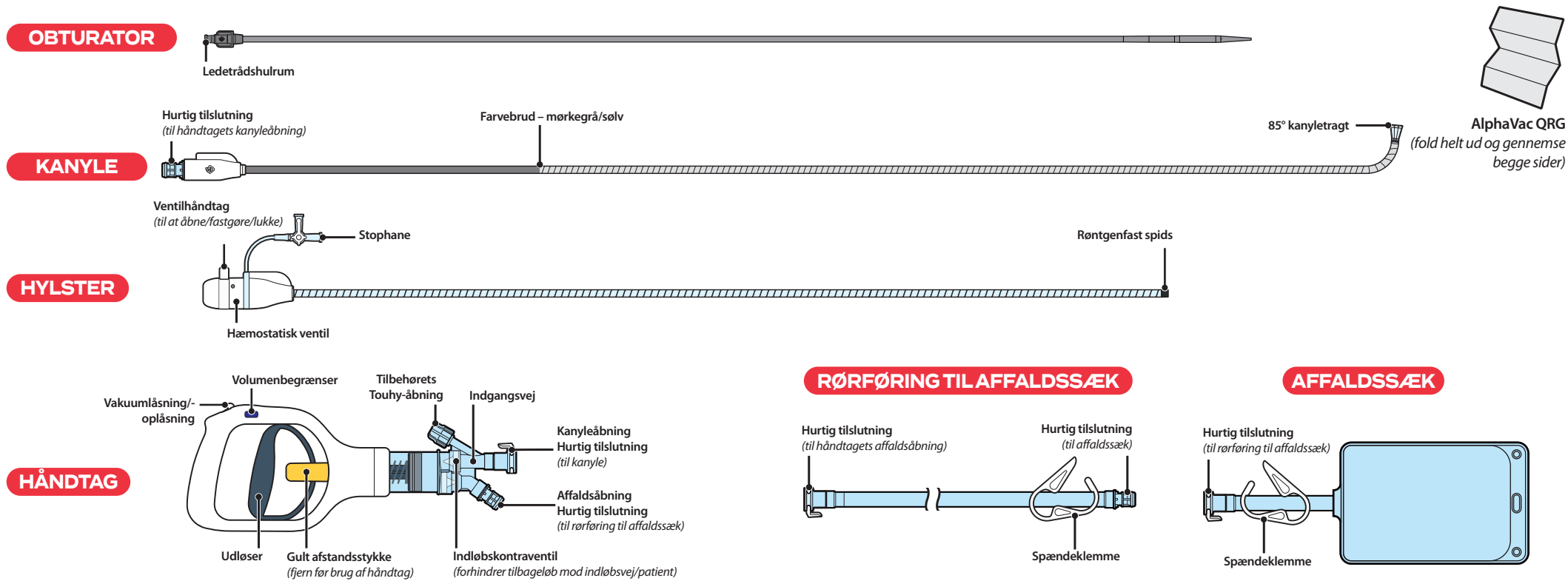




Opsætning/forbereder

Indsæt

Før obturatoren ind i hylsteret

- Sæt obturatoren helt ind i hylsteret.

FASTGØR

Fastgør ventilhåndtaget

- Drej ventilhåndtaget til sikker position for at fastgøre obturatoren.

Skyl

Skyl ledetrådens hulrum og stophanen

- Skyl ledetrådens hulrum.
- Skyl og luk stophanen på hylsteret.

Åben

Lukket

Kontrollér før overdragelse

Hylster- og obturatorenheden er klar til placering i patienten, når:

- KONTROLLÉR OG SØRG FOR FØLGENDE**
- Obturatoren er indført i hylsteret.
 - Ventilhåndtaget er fastgjort.
 - Både ledetrådens hulrum og stophanen er skyllet.
 - Stophanen er lukket.

Klar til, at lægen placerer i patienten



Læge/praktiserende læge

tromboemboli

hylster

Indfør og placer hylster i patient

- Introducer hylsteret/obturatoren.
- Placer hylsterets spids i et område uden tromboemboli til udtrækning (denne placering tillader tragtudvidelse før aspiration).

ÅBEN

Åbn ventilhåndtaget

- Åbn ventilhåndtaget.

Fjern

Fjern både obturator og ledetråd eller kun obturator

- Mens du holder hylsteret på plads, skal du fjerne både obturatoren og ledetråden eller kun obturatoren. Hylsteret skal forblive i patienten.
- Hvis ledetråden forbliver i patienten, skal du dreje ventilhåndtaget til den lukkede position. Hvis ledetråden fjernes med obturatoren, vil den hæmostatiske ventil opretholde blodstase.

Hylsteret er klar til modtagelse af kanyle og håndtag, når:

- KONTROLLÉR OG SØRG FOR FØLGENDE**
- Hylsteret er placeret væk fra tromboemboli.
 - Både obturator og ledetråd eller kun obturator er fjernet fra hylsteret.

Hylsteret er klar til modtagelse af kanyle og håndtag



Opsætning/forbereder

Drej for at lukke tilbehørs Touhy-åbning

Løft og fjern det gule afstandsstykke

Luk Touhy, og fjern det gule afstandsstykke

- Luk tilbehørs Touhy-åbning.
- Løft og fjern det gule afstandsstykke.

Tilslut

Tilslut kanyle, affaldsrørføring og -sæk

- Tilslut kanyle til håndtag.
- Tilslut affaldsrørføring til håndtag.
- Tilslut affaldssæk til rørføring.

Klargør håndtagsenheden

- Placer tragtenden af kanylen i en skål med sterilt saltvand.
- Aktivér håndtagets udløser helt tre gange i indstillingen 30 cc for at prime systemet.
- Frakobl og tøm affaldsposen for primingopløsning og luft, og tilslut derefter affaldsposen igen.

AlphaVac-håndteringsenheden er klar til lægen, når:

- KONTROLLÉR OG SØRG FOR FØLGENDE**
- Tilbehørs Touhy-åbning er lukket.
 - Det gule afstandsstykke er fjernet.
 - Håndtagsenheden er primet.
 - Kanylen, affaldssækkens rørføring og affaldssækken er forbundet til håndtaget.

Håndtagsenheden er klar til lægen



Fold helt ud og gennemse begge sider

Læge/praktiserende læge

ÅBEN

Indsæt Kanyle

Indfør op til den mørkegrå del, og den sølvfarvede del ikke længere er synlig

Før kanylen ind i hylsteret

- Kontrollér eller åbn ventilhåndtaget.
- Hold hylsteret i et område uden tromboemboli til udtrækning.
- Indfør kanylen i hylsteret op til den mørkegrå del, og indtil den sølvfarvede del ikke længere er synlig.
- Træk i håndtagets udløser én gang ved 10 cc-indstillingen for at tømme eventuel luft, der kommer ind under kanyleindsættelse.

UNDLAD at forlænge tragten ud over hylsteret, indtil primingen er fuldført.

FORSIGTIG: Udvidelse af tragten ud over hylsteret før priming kan indføre luft og bringe patienten i fare. Hold tragten inde i hylsteret, indtil primingen er fuldført.

Fastgør kanyle

- Drej ventilhåndtaget til sikker position for at fastgøre kanylen.

Aspirer og skyl

Aspirer og skyl hylsterets stophane

- Aspirer luft fra stophanen, og skyl og luk derefter stophanen.

Åbn tilbehørets Touhy-åbning for at tillade returudluftning

Luk åbningen, når returudluftningen finder sted

Åbn/luk Touhy-åbning for returudluftning

- Åbn tilbehørets Touhy-åbning.
- Tillad returudluftning via åbningen.
- Luk åbningen.

AlphaVac-systemet er klargjort og klar til brug, når:

KONTROLLÉR OG SØRG FOR FØLGENDE

- Kanylen er indført i hylsteret op til den mørkegrå del.
- Ventilhåndtaget er fastgjort.
- Stophanen er blevet aspireret, skyllet og lukket.
- Returudluftning via tilbehørets Touhy-åbning blev fuldført.
- Tilbehørets Touhy-åbning er lukket.

AlphaVac-systemet er klar til brug



Læge/praktiserende læge

ÅBEN

Fremfør kanyletragt

FASTGØR

Fremfør tragten

- Åbn ventilhåndtaget.
- Fremfør kanyletragt.
- Drej ventilhåndtaget til sikker position for at fastgøre kanylen.

Naviger til og arbejder med tromboemboli

- Naviger til tromboemboli.
- Træk manuelt i håndtagets udløser efter behov med en kontrolleret bevægelse for gradvist at bearbejde tromboemboli.

Når der arbejdes med tromboemboli

- Fortsæt med at pumpe manuelt med en af indstillingerne 10 cc (ml) eller 30 cc (ml).
- eller brug vakuumlåsen (se næste billede).

Brug af vakuumlåsen (brug kun, når kanylen er lukket)

- Der skal arbejdes med tromboemboli.
- Brug indstillingen 30 cc (ml), og aktivér vakuumlåsen.
- Fortsæt med at overvåge proceduren.

- FORSIGTIG:** Åbning af tilbehørets Touhy-åbning under vakuum kan indføre luft i systemet og bringe patienten i fare. Udvis forsigtighed ved åbning af tilbehørets Touhy-åbning for at undgå at føre luft ind i systemet.

Læge/praktiserende læge

ÅBEN

Træk kanyletragt tilbage

FASTGØR

Træk tragten tilbage

- Åbn ventilhåndtaget.
- Træk kanylen tilbage, så tragten er helt tilbagetrukket inde i hylsteret.
- Drej ventilhåndtaget til sikker position for at fastgøre kanylen.

Fjern systemet

- Lad håndtaget forblive forbundet til kanylen ved fjernelse af system fra patient.

FORSIGTIG: Under fjernelse DU MÅ IKKE afkoble håndtaget fra kanylen. Hvis der er tromboemboli i kanylen, kan det føre til returstrøm af blod gennem kanylen og genindførsel af tromboembolien.

angiodynamics

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

**HURTIG
REFERENCE-
VEJLEDNING**

ifu.angiodynamics.com

19903659-27 Rev A 03/2025

AngioDynamics og AngioDynamics-logoet, AlphaVac og AlphaVac-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker, som tilhører AngioDynamics, Inc. et associeret selskab eller et datterselskab.

© 2025 AngioDynamics, Inc. eller dennes tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797