



OBTURATOR



KANILA

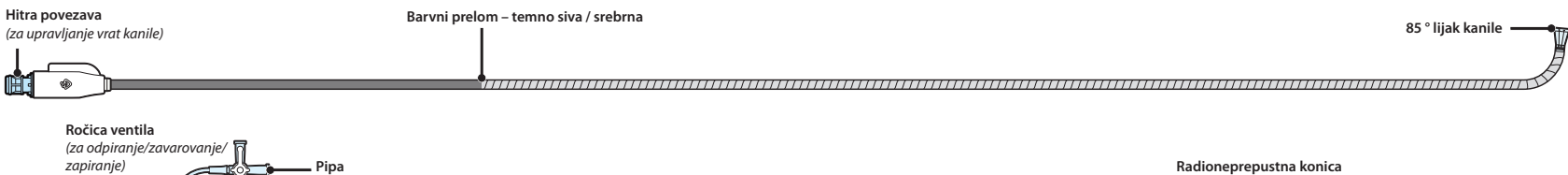


UVAJALNA CEVKA


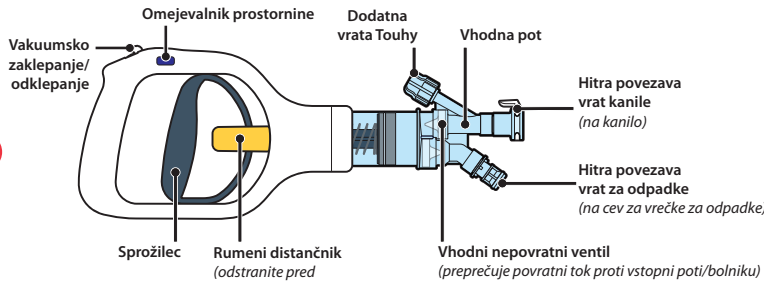


ROČAJ


VOD ZA ODPADKE.

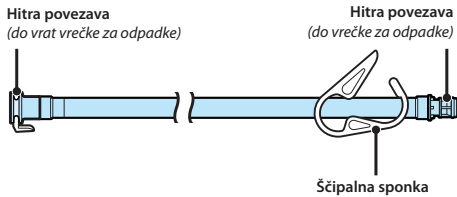

VREČKA ZA ODPADKE

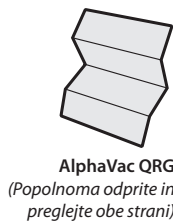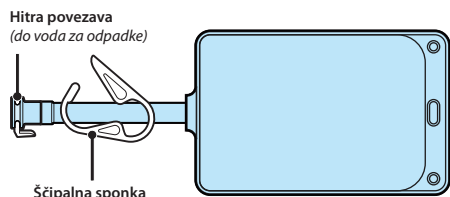


Nastavitev/priprava

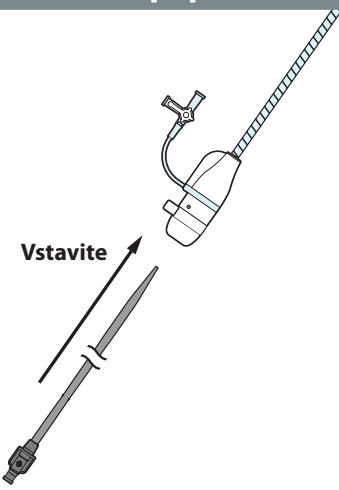


Vstavite obturator v uvajalno cevko.

- Obturator do konca vstavite v uvajalno cevko.

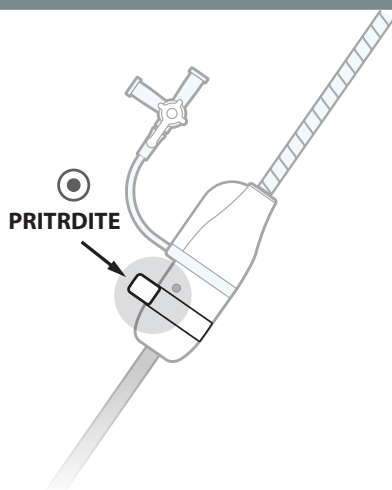

Pritrdite ročico ventila

- Obrnite ročico ventila v varen položaj, da pritrdite obturator.

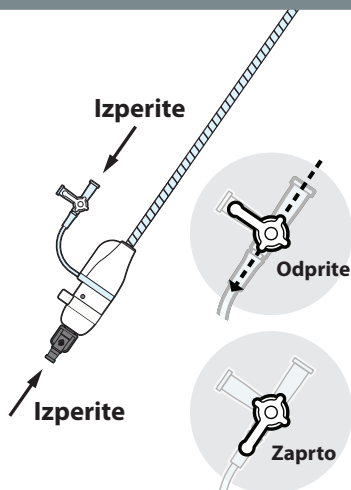

Izperite lumen vodilne žice in zaporno pipo

- Izperite lumen vodilne žice.
- Izperite in zaprite zaporno pipo na uvajalni cevki.

Sklop uvajalne žice in obturatorja je pripravljen za namestitev v bolnika, ko:

PREVERITE IN ZAGOTOVITE


- Obturator je vstavljen v ovoj.
- Ročica ventila je zavarovana.
- Lumen vodilne žice in zaporna pipa sta izprana.
- Zaporna pipa je zaprta.

Pripomoček je pripravljen, da ga zdravnik vstavi v pacienta




Preverite pred predajo →

Zdravnik/praktik

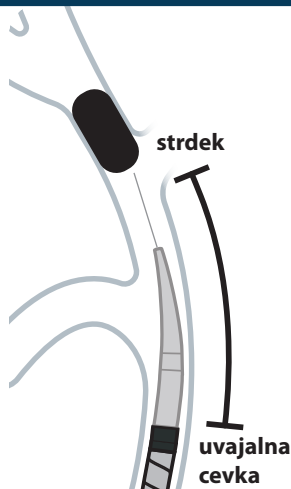


Uvedite in namestite uvajalno cevko v bolnika

- Uvedite uvajalno cevko/obturator.
- Postavite konico uvajalne cevke na območje brez strdkov za ekstrakcijo (ta položaj omogoča razširitev lijaka pred aspiracijo).

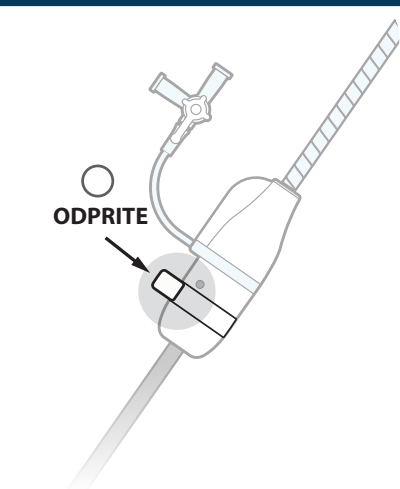

Odprite ročico ventila

- Odprite ročico ventila.

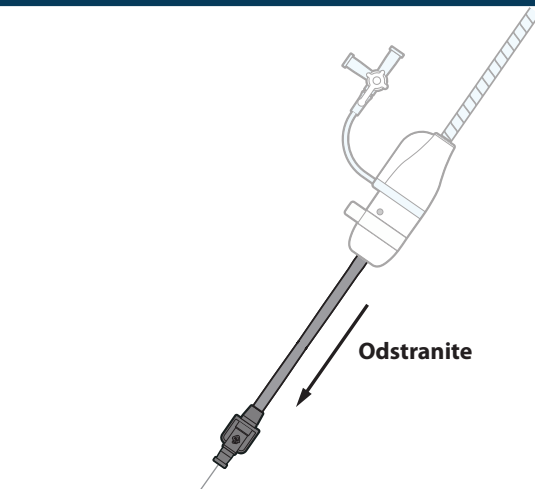

Odstranite obturator in vodilo ali samo obturator

- Medtem ko držite uvajalno cevko na mestu, odstranite tako obturator in vodilo ali samo obturator. Uvajalna cevka naj ostane v bolniku.
- Če vodilo ostane v bolniku, obrnite ročico ventila v zaprt položaj. Če vodilo odstranite iz obturatorja, bo hemostatski ventil vzdrževal zastoj krvi.

Uvajalna cevka je pripravljena za sprejem kanile in ročaja, ko:


PREVERITE IN ZAGOTOVITE

- Uvajalna cevka je nameščena stran od strdkov.
- Obturator in vodilo ali samo obturator je odstranjen iz uvajalne cevke.

Uvajalna cevka je pripravljena do sprejem kanile in ročaja




Nastavitev/priprava

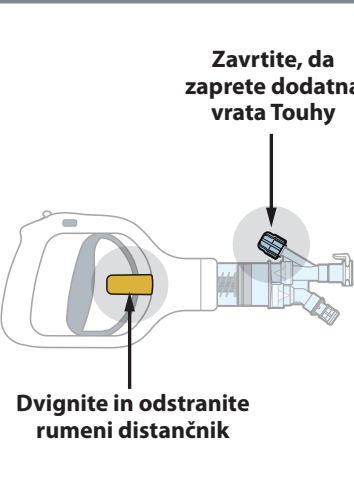

Zaprite vrata Touhy in odstranite rumeni distančnik

- Zaprite dodatna vrata Touhy.
- Dvignite in odstranite rumeni distančnik.

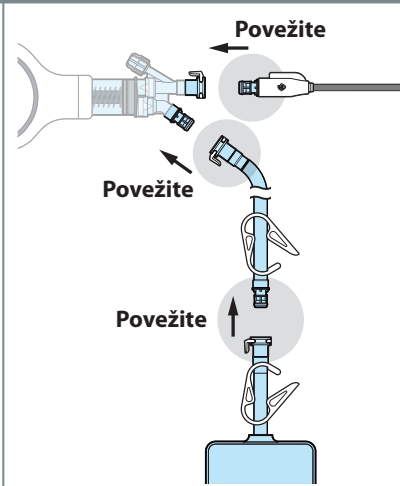

Povežite kanilo, cev za odpadke in vrečko

- Priključite kanilo na ročaj.
- Priključite cev za odpadke na ročaj.
- Priključite vrečko za odpadke na cev.

Napolnite sklop ročaja

- Postavite konec lijaka kanile v posodo s sterilno fiziološko raztopino.
- Trikrat do konca aktivirajte sprožilec ročaja pri nastavitvi 30 cc, da napolnite sistem.
- Odklopite in izpraznite vrečko za odpadke z raztopino za izpiranje in zrakovno ter nato ponovno povežite vrečko za odpadke.

Sklop ročaja AlphaVac je pripravljen za zdravnika, ko:


PREVERITE IN ZAGOTOVITE

- Dodatna vrata Touhy so zaprta.
- Odstranjen je rumeni distančnik.
- Sklop ročaja je napolnjen.
- Kanila, cev vrečke za odpadke in vrečka za odpadke so povezani z ročajem.

Sklop ročaja je pripravljen za zdravnika



Preverite pred predajo →

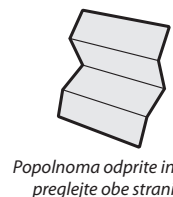

PRIPRAVA
VSTAVITE KANILO IN NAPOLNITE SISTEM

Zdravnik/praktik

ODPRITE

Vstavite Kanila

Vstavite do temno sivega dela, tako da srebrni del ni več viden

NE podaljšajte lijaka iz uvajalne cevke, dokler ni končano polnjenje.

POZOR: Podaljšanje lijaka iz uvajalne cevke pred polnjenjem lahko vnese zrak in ogrozi bolnika. Držite lijak v uvajalni cevki, dokler ni končano polnjenje.

Vstavite kanilo v uvajalno cevko

- Preverite ali odprite ročico ventila.
- Za ekstrakcijo hranite uvajalno cevko na mestu brez strdkov.
- Vstavite kanilo v uvajalno cevko do temno sivega dela, tako da srebrni del ni več viden.
- Povlecite sprožilec ročaja na nastavitev 10 cc, da izpraznite morebiten zrak, ki je morda vnesen med vstavljanjem kanila.

PRITRDITE

Zavarujte kanilo

- Obrnite ročico ventila v varen položaj, da pritrdite kanilo.

Aspirirajte in izperite zaporno pipo uvajalne cevke

- Aspirirajte zrak iz zaporne pipe, nato izperite in zaprite zaporno pipo.

Odprite dodatna vrata Touhy, da omogočite odtok nazaj

Zaprte vrata, ko se pojavi povratna krvavitev

Odprite/zaprte dodatna vrata Touhy za povratno krvavitev

- Odprite dodatna vrata Touhy.
- Dovolite povratno krvavitev nazaj skozi vrata.
- Zaprte vrata.

- Sistem AlphaVac je napolnjen in pripravljen za delovanje, ko:
- PREVERITE IN ZAGOTOVITE**
- Kanila je vstavljena v uvajalno cevko do temno sivega dela.
 - Ročica ventila je zavarovana.
 - Zaporna pipa je bila aspirirana, izprana in zaprta.
 - Izveden je bil povratna krvavitev prek dodatnih vrat Touhy.
 - Dodatna vrata Touhy so zaprta.
- Sistem AlphaVac je pripravljen za uporabo**



UPORABA
ODSTRANJEVANJE STRDKOV

Zdravnik/praktik

ODPRITE

Pomaknite lijak kanile naprej

PRITRDITE

Pomaknite lijak naprej

- Odprite ročico ventila.
- Pomaknite lijak kanile naprej.
- Obrnite ročico ventila v varen položaj, da pritrdite kanilo.

Pomaknite se in zajemite strdek

- Pomaknite se do strdka.
- Po potrebi ročno povlecite sprožilec ročaja z nadzorovanim gibom, da postopoma zajamete strdek.

Ko je strdek zajet

- Nadaljujte z ročnim črpanjem z nastavitvijo na 10 cc (ml) ali 30 cc (ml).
- ali uporabite vakuumsko zaporo (glejte naslednjo sliko).

Uporaba vakuumske zapore (uporabite le, ko je kanila zamašena)

- Treba je zajeti strdek.
- Uporabite nastavitev 30 cc (ml) in vključite vakuumsko zaporo.
- Nadaljujte s spremljanjem postopka.

- POZOR:** Odpiranje dodatnih vrat Touhy za dodatno opremo med vakuumom lahko vnese zrak v sistem in ogrozi bolnika. Bodite previdni, ko odpirate dodatna vrata Touhy, da preprečite vnos zraka v sistem.

UPORABA
ODSTRANJEVANJE SISTEMA IZ BOLNIKA

Zdravnik/praktik

ODPRITE

Potegnite nazaj lijak kanile

PRITRDITE

Izvlecite lijak

- Odprite ročico ventila.
- Povlecite kanilo nazaj, tako da je lijak popolnoma umaknjen znotraj uvajalne cevke.
- Obrnite ročico ventila v varen položaj, da pritrdite kanilo.

Odstranite sistem

- Ko odstranjujete sistem iz bolnika, naj bo ročaj pritrjen na kanilo.

POZOR: Pri odstranjevanju, **NE** odklopite ročaja s kanile. Če je v kanili strdek, lahko pride do povratnega toka krvi skozi kanilo in ponovnega vnosa strdka.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

HITRI REFERENČNI PRIROČNIK

ifu.angiodynamics.com

19903659-32 Rev A 03/2025

AngioDynamics, logotip AngioDynamics, AlphaVac in logotip AlphaVac so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe AngioDynamics, Inc ter povezanih ali hčerinskih podjetij.

© 2025 AngioDynamics, Inc ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797



HITRI REFERENČNI PRIROČNIK

- PRIPRAVA**
SKLOP OBTURATORJA IN UVAJALNE CEVKE
- PRIPRAVA**
NAMESTITEV UVAJALNE CEVKE V BOLNIKA
- PRIPRAVA**
PRIPRAVA SKLOPA ROČAJA
- PRIPRAVA**
VSTAVITE KANILO IN NAPOLNITE SISTEM
- UPORABA**
ODSTRANJEVANJE STRDKOV
- UPORABA**
ODSTRANJEVANJE SISTEMA IZ BOLNIKA

POMEMBNO: Pred uporabo izdelka, za popolne indikacije, navodila, opozorila, previdnostne ukrepe, možne neželene učinke in kontraindikacije, preberite navodila za uporabo, ki so priložena izdelku.